


INSTRUKTION FOR BRUG


TO-HÅNDSBETJENING

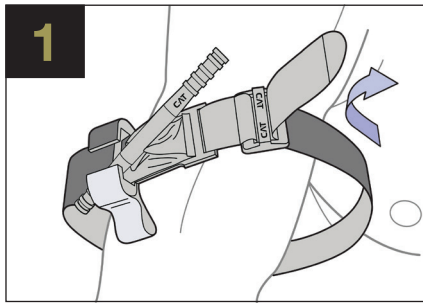


Placere Velcro båndet omkring ekstremiteten og før Velcro båndet gennem friktionsspændet. Placer **CAT** 5-7, 5cm. over det blødende sted, direkte på huden. Stram **CAT** til blødningen stopper.*

OR


EN-HÅNDSBETJENING

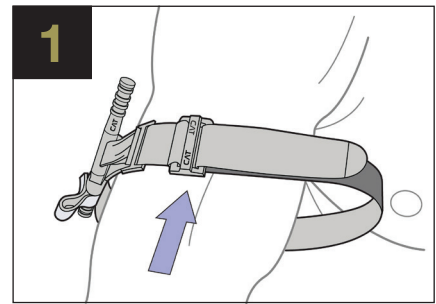


Indsæt den skadede ekstremitet gennem loopet i Velcro båndet. Placer **CAT** 5-7, 5cm. over det blødende sted, direkte på huden.*

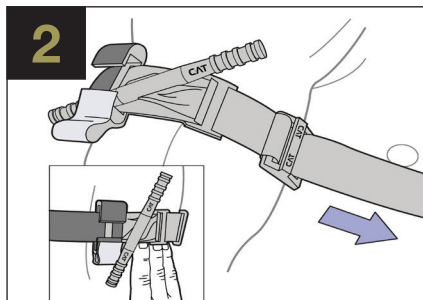


Stram Velcro båndet og sikre det mod sig selv. Fastgør Velcro båndet omkring ekstremiteten, dog ikke forbi drejepinden og plastik låsen. Velcro båndet skal være så stram at man ikke kan få tre (3) finger spidser mellem velcro båndet og ekstremiteten. Kan der placeres tre (3) finger spidser mellem båndet og ekstremiteten, strammes den yderligere.

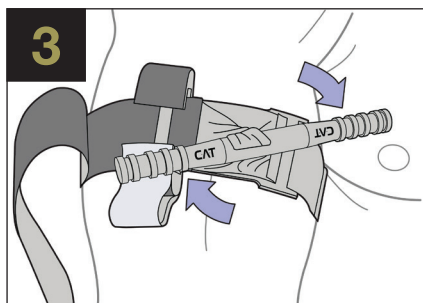

Drejepinden drejes til lys rød blødning og distal puls er forsvundet

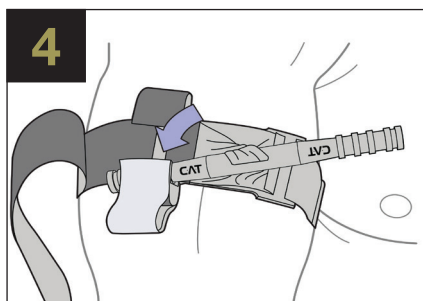


Lås drejepinden i plastik låsen. revurder blødning og distal puls. Hvis blødningen stadig ikke er stoppet, stram yderligere eller anlæg yderligere en **CAT**. umiddelbart over den allerede anlagte **CAT**.
Revurder!

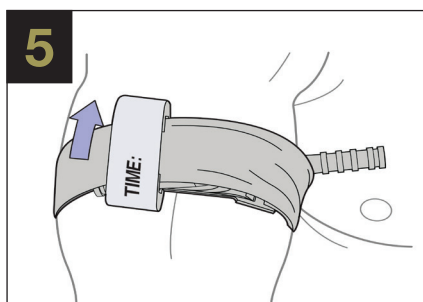


Før Velcro båndet gennem plastik låsen og over drejepinden. Drejepinden og Velcro bånd sikres i plastik låsen med velcro bånd (TIME). HUSK AT PÅFØRE TID FOR ANLÆGGELSE!

* Hvis man ikke med sikkerhed kan identificere blødningen eller hvis situationen ikke tillader det, kan **CAT** påføres uden på beklædning. Placeres så højt på ARM eller BEN som muligt. Vær opmærksom på at **CAT** ikke placeres ovenpå indhold i lommer etc. Så hurtigt som muligt bør skaden vurderes og **CAT** re-placeres 5-7,5 cm. Over det skadede sted, direkte på huden.


OPBEVARING AF CAT I "QUICK LAUNCH" KONFIGURATION

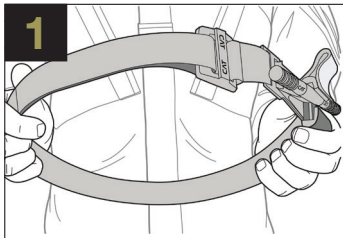

Før ca. 20 cm af Velcro båndet gennem revnen i friktionsspændet og lad Velcro båndet klæbe mod sig selv.

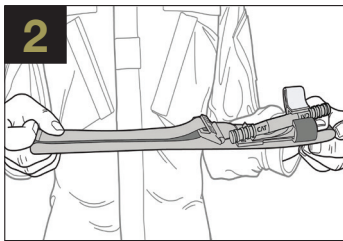

CAT foldes fladt således at friktionsspændet befinder sig i midten.

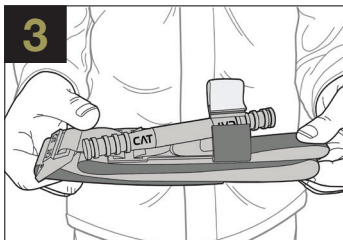

Fold CAT fladt således at friktionsspændet befinder sig for enden. Vær OBS på at TIME snippen er åben og i klar position; som vist på illustrationen.

CAT er nu klar til opbevaring i holder, IFAK el. lign.

ANSVARSBEGRÆNSNING:


C-A-T Resources, LLC, dets moderselskab Composite Resources, Inc., dets ansatte, agenter, entreprenører, leverandører og distributører påtager sig intet ansvar for personskader eller skader, der opstår som følge af anvendelsen eller brugen af Combat Application Tourniquet® (CAT). Brugeren påtager sig enhver risiko for ansvar. CAT Bør kun bruges som anvist af brugerens retningslinjer for militærtjeneste, EMS-autoritet eller under opsyn af en læge og i nøje overensstemmelse med denne brugsvejledning.

RETNINGSLINJER FOR STANDARDBRUG

Når den påføres i overensstemmelse med anvisningerne, er Combat Application Tourniquet® (CAT) en sikker og effektiv enhed til at kontrollere livstruende ekstremitetsblødning. CAT Har en maksimal driftsomkreds på 88,9cm (35in). Brug af en hvilken som helst turnet i mere end 2 timer kan føre til permanent neurologisk eller muskelskade. Hvis du ikke kan være sikker eller ikke kan tage den ekstra tid til at undersøge, hvor blødningen kommer fra, baseret på situationen, kan CAT effektivt påføres over tøj så højt på armen eller benet som muligt. CAT Må IKKE påføres på faste genstande i tøjet. Så snart situationen tillader det, skal det skadede lem evalueres og CAT placeres 2"-3" over skaden direkte på huden. CAT Skal opbevares et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys. Genbrug af denne enhed til engangsbrug kan medføre risiko for infektion. Bortskaf brugt CAT i overensstemmelse med lokale regler for biomedicinsk affald. Rapportér alle alvorlige hændelser i forbindelse med CAT til producenten og den relevante regulerende myndighed.



INST-008 REV03 2021-05-18

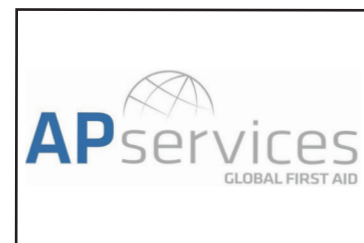

Distribution in Sweden, Norway,
Denmark & Finland by:
AP Services +45 96907090

info@ap-services.dk www.ap-services.dk



TACTICAL BLACK (Taktisk, SORT)
NSN 6515-01-521-7976



TRAINER BLUE (Træner, BLÅ)
NSN 6910-01-560-2972



EMS ORANGE

<p>Combat Application Tourniquet® and CAT are trademarks registered in the United States and certain other countries.</p>	
<p>U.S. Patent Nos. 7,842,067; 7,892,253; 8,888,807; 10,016,203; Canada Patent No. 2,569,550; EU Patent Nos. 1,753,344; 2,425,786; Israel Patent No. 179769; Hong Kong Patent No. 1,163,479; Other Patents Pending</p>	<p>Manufactured by C-A-T Resources, LLC 483 Lakeshore Pkwy, Rock Hill, SC 29730 United States of America 803.325.9300</p>