



KÄYTTÖOHJEET

KAHDEN KÄDEN KÄYTTÖ

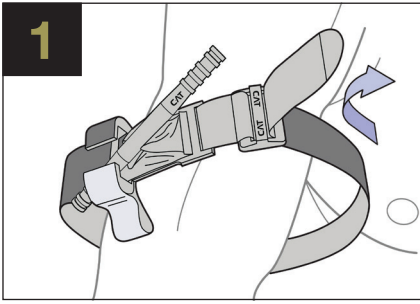


Vedä side raajan ympäri. Vedä kärki soljen aukon läpi ja aseta **CAT** 5-7 senttiä verenvuodon yläpuolelle suoraan iholle.*

YHDENKÄDEN KÄYTTÖ

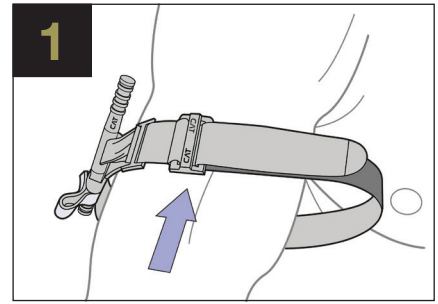


Aseta haavoittunut raaja siteen silmukan läpi ja aseta **CAT** 5-7 senttiä verenvuodon yläpuolelle suoraan iholle.*


TAI

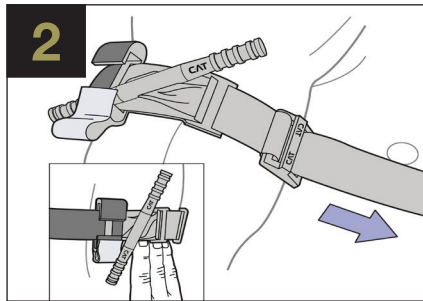


Kiristä side mahdollisimman tiukalle ja kiinnitä tarranauha itseensä koko matkalta raajan ympäri, ei kuitenkaan sauvan pidikkeiden yli. Siteen on oltava niin tiukalla, ettei sen ja raajan väliin saa työnnettyä sormia. Esikiristä side tarvittaessa uudelleen.

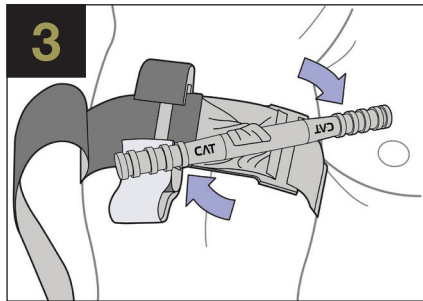

Kierrä sauvaa, kunnes verenvuoto tyrehtyy.

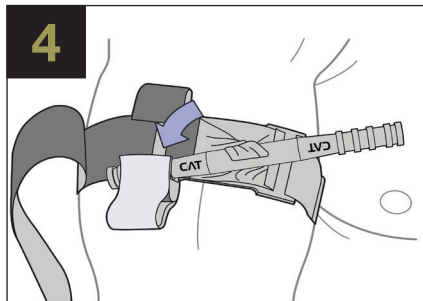


Lukitse sauva kiinnittämällä se pidikkeisiin. Tarkista mahdollinen verenvuoto ja distaalinen pulssi. Jos verenvuoto ei ole hallinnassa tai distaalinen pulssi tuntuu, kiristä sidettä sauvasta lisää tai harkitse toisen **CAT** kiristysiteen käyttöä edellisen yläpuolella ja rinnakkain. Suorita arviointi uudelleen.

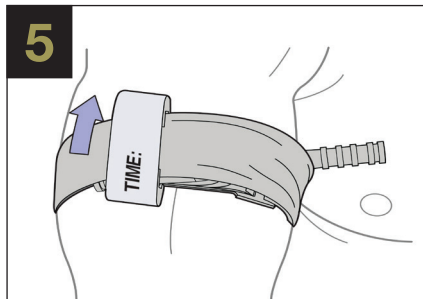


Vedä side pidikkeiden välistä ja sauvan yli. Varmista sauva ja side vetämällä TIME-hihna molempien pidikkeiden yli. Kirjoita ylös sitomisaika.

* Jos et ole varma tai sinulla ei ole aikaa tarkistaa, mistä kohtaa verenvuoto on peräisin, voidaan **CAT** kiristyside laittaa vaatteiden päälle, jalan tai käden tyviosaan. **CAT** kiristysidettä ei saa laittaa vaatteissa olevien kiinteiden esineiden päälle. Arvioi vaurioituneen raajan tilanne heti tilanteen salliessa ja laita **CAT** kiristyside 5-7 cm vamman yläpuolelle suoraan iholle.


CAT-KIRISTYSSITEEN SÄILYTTÄMINEN PIKAKÄYTTÖKOKOONPANOSSA

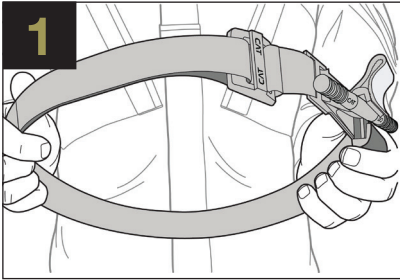


Vedä kärki soljen aukon läpi.
Vedä sidettä 20 senttiä läpi,
taita se ja kiinnitä se itseensä.

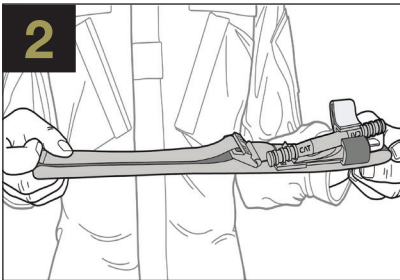

Paina siteen silmukka litteäksi.
Aseta solki keskelle litteäksi
painettua sidettä.

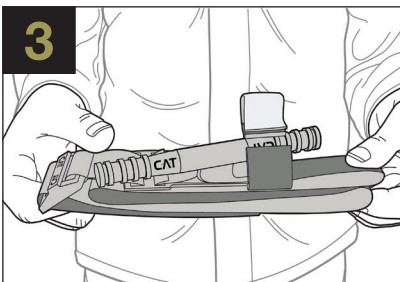

CAT kiristysvide on nyt valmis säilytykseen.

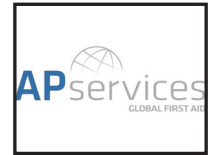

INST-008 REV03 2021-05-18



Distribution in Sweden, Norway, Denmark &
Finland by:
AP Services +45 96907090
info@ap-services.dk www.ap-services.dk

VASTUUNRAJOITUS

C-A-T Resources, LLC, sen emoyhtiö Composite Resources, Inc., sen työntekijät, edustajat, urakoitsijat, toimittajat ja jakelijat eivät ole vastuussa vahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Combat Application Tourniquet® (CAT) -sovelluksesta tai käytöstä. Käyttäjä ottaa kaiken vastuun vastuun. CAT -Merkkiä tulisi käyttää vain käyttäjän asepalvelukomponenttien ohjeiden, EMS-viranomaisen ohjeiden mukaan tai lääkärin valvonnassa ja noudattaen tarkasti näitä käyttöohjeita.

YLEINEN KÄYTTÖ

Kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti, Combat Application Tourniquet® (CAT) on turvallinen ja tehokas laite hengenvaarallisen raajojen verenvuodon hallintaan. CAT: N suurin käyttöympäristö on 35 tuumaa (88,9 cm). Kaikkien puristusten käyttö yli 2 tuntia voi johtaa pysyviin neurologisiin tai lihaskivertäisiin. Jos et voi olla varma tai et voi ottaa ylimääräistä aikaa tutkia, mistä verenvuoto on tilanteen perusteella, CAT voidaan käyttää tehokkaasti vaatteisiin, jotka ovat mahdollisimman korkealla käsivarteen tai jalkaan. CAT Ei saa levittää vaatteiden kiinteiden esineiden päälle. Heti kun tilanne sen sallii, loukkaantunut raaja tulisi arvioida ja CAT sijoittaa 2"-3" takaisin loukkaantumisen yläpuolelle suoraan iholle. CAT On säilytettävä viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta. Tämän kertakäyttöisen laitteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa infektioriskin. Hävitätä käytetty CAT paikallisten biolääketieteellisten jätteiden määräysten mukaisesti. Ilmoita kaikista vakavista tapahtumista CAT liittyen valmistajalle ja asianomaiselle sääntelyviranomaiselle.



TAKTINEN MUSTA
NSN 6515-01-521-7976



HARJOITTAJA SININEN
NSN 6910-01-560-2972



EMS-ORANSSI

Combat Application Tourniquet® and CAT
are trademarks registered in the United States and certain other countries.

U.S. Patent Nos. 7,842,067; 7,892,253;
8,888,807; 10,016,203;
Canada Patent No. 2,569,550;
EU Patent Nos. 1,753,344; 2,425,786;
Israel Patent No. 179769;
Hong Kong Patent No. 1,163,479;
Other Patents Pending

Manufactured by C-A-T Resources, LLC
483 Lakeshore Pkwy, Rock Hill, SC 29730
United States of America
803.325.9300