



Bruksanvisning

Tvåhandsapplicering

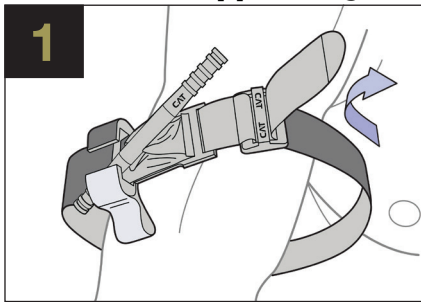


Dra bandet runt extremiteten, tryck änden på bandet genom spännet och placera **CAT** 5-7,5cm ovanför blödningen direkt mot huden.*

Enhandsapplicering

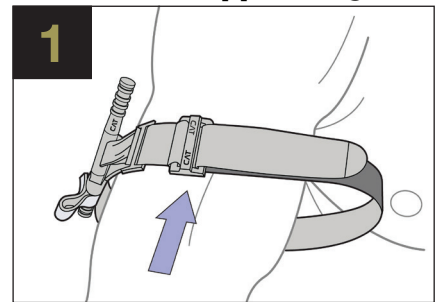


Placera den skadade extremiteten genom öglan och placera **CAT** 5-7,5cm ovanför blödningen direkt mot huden.*


ELLER

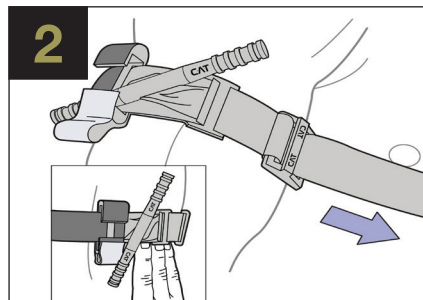


Dra åt bandet hårt och sätt fast den på bandet genom att dra bandet tillbaka över kardborren men inte över låsbygel. Bandet skall sitta så hårt att man inte kan få in tre(3) fingrar mellan bandet och extremiteten. Om man kan få in tre(3) fingrar mellan bandet och extremiteten så spänn igen och fäst.

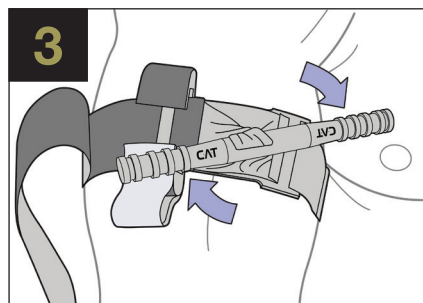

Vrid staven till dess blödningen är stoppad.

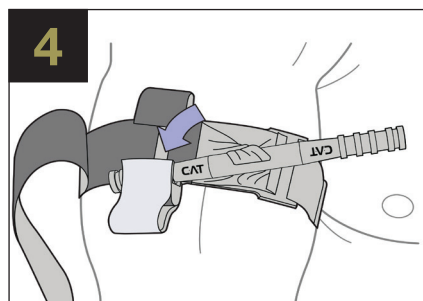


Säkra staven inne i låsbygel. Kontrollera blödningen och distal puls. Om blödningen fortsätter eller det finns distal puls, överväg om bandet behöver spännas mer eller om man skall applicera en andra **CAT** ovanpå eller vid sidan om den första. Omvärdera.

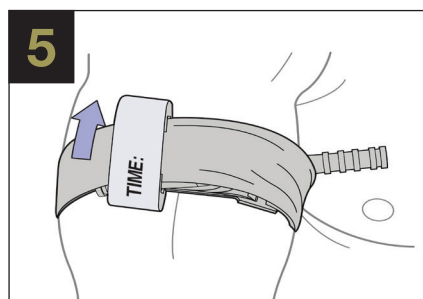


Trä bandet mellan spännet och över staven. Säkra staven och bandet med fliken märkt med TIME. Dokumentera tid för applicering.

*Om du inte kan vara säker eller har tillräckligt med tid för att undersöka var blödningen kommer ifrån på grund av situationen, kan **CAT** appliceras över kläder så högt upp på armen eller benet som möjligt. **CAT** skall inte appliceras över hårda objekt i fickor. Så fort situationen tillåter skall den skadade extremiteten revalueras och **CAT** skall placeras 5-7,5cm ovan skadan direkt mot huden.


FÖRVARING AV CAT I "QUICK LAUNCH"-KONFIGURATION

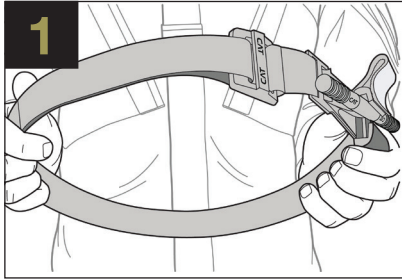

Trä änden på bandet igenom hålet i spännet. Dra igenom 20cm av bandet, vik tillbaka det och fäst det på kardborren på bandet.

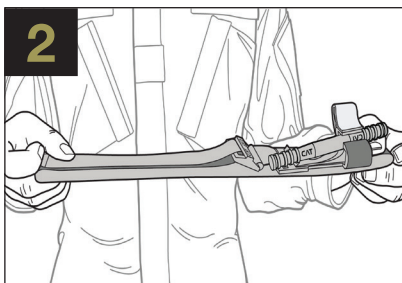

Platta till öglan som formades av bandet. Placera spännet i mitten av det tillplattade bandet.

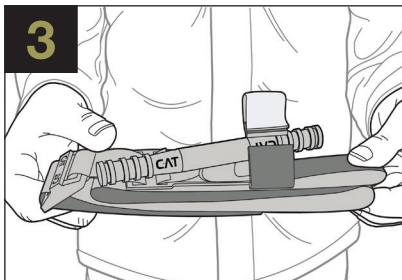

Vik **CAT** på hälften med spännet vid ena änden. Se till att TIME-fliken är öppen och i position för användning som bilden visar.

CAT är nu klar att placeras i din sjukvårdsutrustning.

ANSVARSBEGRÄNSNING:

C-A-T Resources, LLC, dess moderbolag Composite Resources, Inc., dess anställda, agenter, entreprenörer, leverantörer och distributörer tar inget ansvar för skador eller skador som uppstår till följd av tillämpningen eller användningen av Combat Application Tourniquet® (**CAT**). Användaren tar all risk för ansvar. **CAT** bör endast användas enligt anvisningar från användarens riktlinjer för militärtjänstkomponenter, EMS-myndighet eller under överinseende av en läkare och i strikt överensstämmelse med dessa bruksanvisningar.

RIKTLINJER FÖR STANDARDANVÄNDNING

Vid applicering enligt anvisningarna är Combat Application Tourniquet® (**CAT**) en säker och effektiv anordning för att kontrollera livshotande extremitetsblödning. **CAT** har en maximal arbetsomkrets på 88,9 cm (35 tum). Användning av **CAT** mer än 2 timmar kan leda till permanent neurologisk eller muskelskada. Om du inte kan vara säker eller inte kan ta extra tid att undersöka var blödningen kommer ifrån situationen, kan **CAT** effektivt appliceras på kläder så högt på armen eller benet som möjligt. **CAT** får INTE appliceras på fasta föremål i kläderna. Så snart situationen tillåter bör den skadade lemmen utvärderas och **CAT** placeras om 2"-3" ovanför skadan direkt på huden. **CAT** ska förvaras på en sval, torr plats och utan direkt solljus. Återanvändning av denna engångsanordning kan medföra infektionsrisk. Kassera begagnad **CAT** i enlighet med lokala föreskrifter för biomedicinskt avfall. Rapportera alla allvarliga händelser i samband med **CAT** till tillverkaren och lämplig tillsynsmyndighet.



INST-008 REV03 2021-05-18



Distribution in Sweden, Norway, Denmark & Finland by:
AP Services +45 96907090
info@ap-services.dk www.ap-services.dk



Taktisk svart
NSN 6515-01-521-7976



Blå för övning
NSN 6910-01-560-2972



Ambulans orange

<p>Combat Application Tourniquet® and CAT are trademarks registered in the United States and certain other countries.</p>	
<p>U.S. Patent Nos. 7,842,067; 7,892,253; 8,888,807; 10,016,203; Canada Patent No. 2,569,550; EU Patent Nos. 1,753,344; 2,425,786; Israel Patent No. 179769; Hong Kong Patent No. 1,163,479; Other Patents Pending</p>	<p>Manufactured by C-A-T Resources, LLC 483 Lakeshore Pkwy, Rock Hill, SC 29730 United States of America 803.325.9300</p>