



INSTRUKSJONER FOR BRUK

TO-HANDT SØKNAD

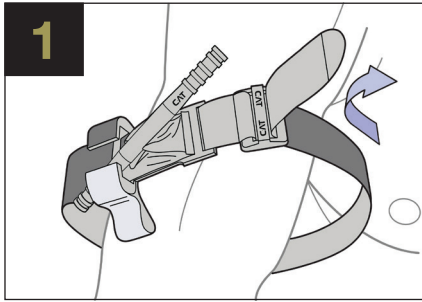


Rute båndet omkring lemmet, passerer spidsen gjennom slidsen af spændet, og placer **CAT** 2-3" over blødende sted direkte på huden. *

ENHENDIG SØKNAD

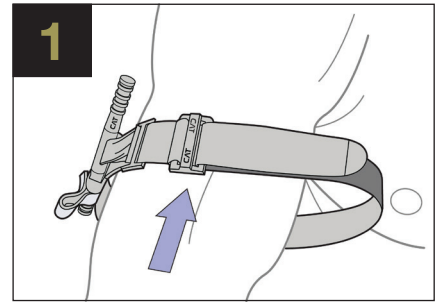


Indsæt det skadede lem gennem sløjfen i båndet, og placer **CAT** 2-3" over blødningsstedet direkte på huden. *


ELLER

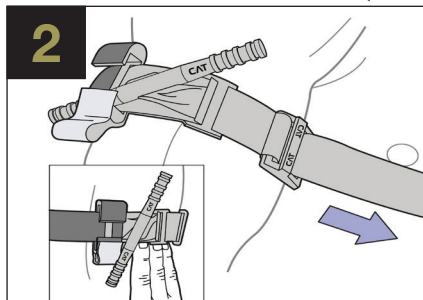


Trekk båndet tett og fest det på seg selv hele lemmen, men ikke over stangklemmene. Båndet skal være tett nok til at spissene på tre (3) fingre ikke kan skyves mellom båndet og lemmen. Hvis tuppen på tre (3) fingre glir under båndet, stram til og fest igjen.

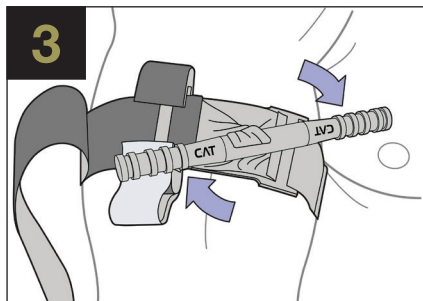

Vri stangen til blødningen har stoppet.

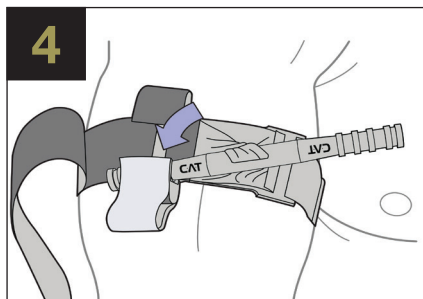


Fest stangen i en klips for å låse den på plass. Sjekk for blødning og distal puls. Hvis blødning ikke er kontrollert, eller distal puls er til stede, bør du vurdere å stramme ekstra eller bruke et sekund **CAT** over og side om side til det første. Vurder på nytt.

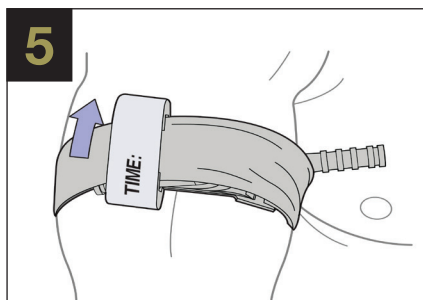


Før båndet mellom klipsene og over stangen. Fest stang og bånd med TIME-stropp. Registrer søknadstid.

* Hvis du ikke kan være sikker eller ikke kan ta ekstra tid til å undersøke hvor blødningen kommer fra, basert på situasjonen, kan **CAT** påføres effektivt over klær så høyt på armen eller benet som mulig. **CAT** MÅ IKKE påføres på faste gjenstander i klærne. Så snart situasjonen tillater det, bør den skadede lemmen evalueres og **CAT** plasseres 2"-3" over skaden direkte på huden.


LAGRING AV CAT I RASK LANSJONSKONFIGURASJON

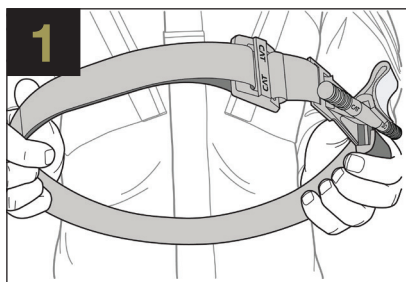

Før spidsen gjennom spalten i spændet. Træk 8 "bånd igennem, fold det tilbage og klæb båndet til sig selv.

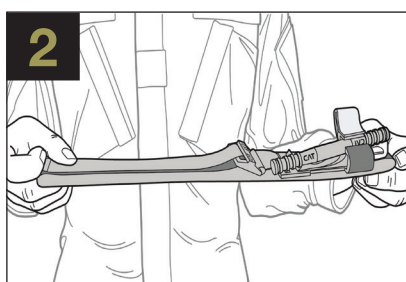

Flatt løkken dannet av båndet. Plasser spennen midt på det flate båndet.

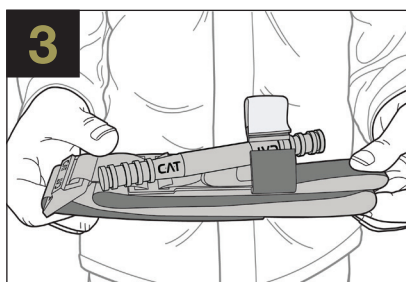

Brett CAT halvveis og plasser spennen i den ene enden. Forsikre deg om at TIME-stroppen er åpen og i klar posisjon, som vist i illustrasjonen.

CAT. Er nå klar til å plasseres i medisinsk sett.

ANSVARSBEGRENSNING:

C-A-T Resources, LLC, morselskapet Composite Resources, Inc., dets ansatte, agenter, entreprenører, leverandører og distributører påtar seg ikke noe ansvar for personskader eller skader som oppstår ved anvendelse eller bruk av Combat Application Tourniquet® **CAT.** Brukeren påtar seg all risiko for ansvar. **CAT.** Bør bare brukes som angitt i brukerens retningslinjer for militærtjeneste, EMS-autoritert eller under tilsyn av en lege, og i strengt samsvar med denne bruksanvisningen.


RETNINGSLINJER FOR STANDARDBRUK

Når den påføres i samsvar med anvisningene, er Combat Application Tourniquet® **CAT.** en sikker og effektiv enhet for å kontrollere livstruende ekstremitetsblødning. **CAT.** Har en maksimal driftsomkrets på 88,9 cm (35 tommer). Bruk av en hvilken som helst turné i mer enn 2 timer kan føre til permanent nevrologisk eller muskelskade. Hvis du ikke er sikker eller ikke kan ta ekstra tid til å undersøke hvor blødningen kommer fra, basert på situasjonen, kan **CAT.** effektivt påføres over klær så høyt på armen eller benet som mulig. **CAT.** Må IKKE påføres på faste gjenstander i klærne. Så snart situasjonen tillater det, bør den skadede lemmen evalueres og **CAT.** plasseres 2 "-3" over skaden direkte på huden. **CAT.** Skal oppbevares på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys. Gjenbruk av dette engangstutstyret kan medføre infeksjonsfare. Kast brukt **CAT.** i samsvar med lokale forskrifter for biomedisinsk avfall. Vennligst rapporter om alle alvorlige hendelser i forhold til **CAT.** til produsenten og passende myndighet.


Combat Application Tourniquet® and **CAT.**
are trademarks registered in the United States and certain other countries.

U.S. Patent Nos. 7,842,067; 7,892,253;
8,888,807; 10,016,203;
Canada Patent No. 2,569,550;
EU Patent Nos. 1,753,344; 2,425,786;
Israel Patent No. 179769;
Hong Kong Patent No. 1,163,479;
Other Patents Pending

Manufactured by C-A-T Resources, LLC
483 Lakeshore Pkwy, Rock Hill, SC 29730
United States of America
803.325.9300

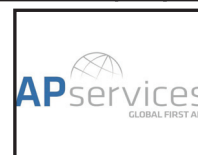

INST-008 REV03 2021-05-18

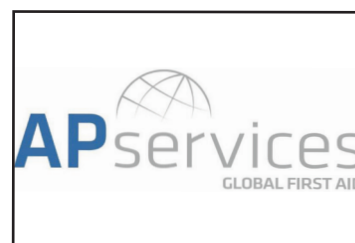

Distribution in Sweden, Norway, Denmark &
Finland by:
AP Services +45 96907090
info@ap-services.dk www.ap-services.dk



TAKTISK SVART
NSN 6515-01-521-7976



TRENER BLÅ
NSN 6910-01-560-2972



EMS ORANGE