



Bruger- og vedligeholdelsesmanual



B-lock hovedstøtte

Rel.08042022
engelsk (UK)



Læs denne manual
omhyggeligt og gem den
til fremtidig reference

Ferno teknisk support

Kundeservice og teknisk support er vigtige aspekter af ethvert Ferno-produkt. Før du kontakter os, skal du notere produktets serienummer og angive det i al skriftlig kommunikation. For alle spørgsmål vedrørende teknisk support, kontakt Ferno srl:

Telefon (gratis i Italien)	800.501.711
Fax	+39 0516861508
E-mail	info@ferno.it


Ferno kundeservice

For assistance og yderligere information, kontakt Ferno srl's kundeservice:

PRODUCENT

Ferno srl, Via Benedetto Zallone 26
40066 - Pieve di Cento (BO) - ITALIEN

Telefon (gratis i Italien)	800.501.711
Telefon	+ 39 0516860028
Fax	+39 0516861508
Website	www.ferno.it

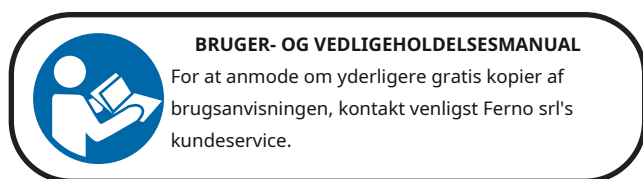

Ansvarsbegrænsning

Denne manual indeholder generelle instruktioner om brug og vedligeholdelse af produktet. Instruktionerne dækker ikke alle mulige anvendelser og operationer. Brugeren er eneansvarlig for korrekt og sikker brug af produktet. Sikkerhedsinformationen leveres som en service til brugeren og sikrer kun det mindst nødvendige sikkerhedsniveau for at forhindre skade på operatører og patienter. Enhver anden sikkerhedsforanstaltning implementeret af brugeren skal overholde gældende regler. Før produktet tages i brug, anbefales det kraftigt, at personalet trænes i dets korrekte brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference. I tilfælde af ejerskifte skal du sikre dig, at manualen forbliver sammen med produktet. Yderligere gratis kopier kan fås hos Ferno srl's kundeservice.

Erklæring om intellektuel ejendom

Oplysningerne i denne manual tilhører Ferno srl - Via Benedetto Zallone 26, 40066 Pieve di Cento (Bologna) Italien. Alle patentrettigheder, design-, konstruktions-, reproduktions-, brugs- og salgsrettigheder vedrørende ethvert emne, der er omfattet af denne manual, er Ferno srl's fortrolige og eksklusive ejendom, undtagen rettigheder, der udtrykkeligt er overført til tredjeparter eller ikke kan henføres til parter, der ejes af leverandøren.

Det er forbudt at gengive denne manual, enten helt eller delvist, uden forudgående samtykke fra Ferno srl.

Begrænset garanti

Ferno-produkter er dækket af en 24-måneders garanti mod fabrikationsfejl. For de fulde vilkår og betingelser for garanti og ansvar, se **afsnittet Garanti**, side 14.

Indberetning af ulykker (MDR 745/17 Att. I, kapitel III, afsnit 23.4)

I tilfælde af, at der opstår en alvorlig ulykke i forbindelse med enheden, skal du straks kontakte Ferno Srl og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren har sit hovedkontor.

E-mail: eu-regulatory@ferno.it

Hjemmeside dedikeret til support - Ferno SOS www.fernosos.it

Telefon +39 051 6860028

Fax +39 0516861508

INDHOLDSFORTEGNELSE

Kapitel/Afsnit	Side	Kapitel/Afsnit	Side
Ferno Kundeservice _____	2	8 - Garanti _____	13
Ferno teknisk support _____	2	8.1 Garantivilkår og betingelser _____	13
1 - Sikkerhedsoplysninger		8.2 Ansvarsbegrænsning _____	13
1.1 Advarsel _____	4	8.3 Garantikrav _____	14
1.2 Vigtigt _____	4	8.4 Klager _____	14
1.3 Blodbårne sygdomme _____	4	8.5 Returgodkendelse _____	14
1.4 Kompatibilitet _____	4	Træningsoptegnelse _____	15
1.5 Ordliste over symboler _____	4		
2- Operatøruddannelse og færdigheder _____	5		
2.1 Færdigheder _____	5		
2.2 Træning _____	5		
3 - Hovedstøtten _____	5		
3.1 Beskrivelse og tilsigtet anvendelse _____	5		
3.2 CE-mærkning _____	5		
3.3 Komponenter (hovedspærre) _____	6		
3.4 Generelle specifikationer _____	6		
4 - Brug af hovedstøtten _____	7		
4.1 Brugsanvisning _____	7		
4.2 - Anvendelse af hovedstøtte _____	8		
5 - Vedligeholdelse _____	10		
5.1 Rutinemæssig vedligeholdelse _____	10		
5.2 Sanerings- og desinfektionsprocedure _____	10		
5.3 Desinfektion _____	10		
5.4 Rengøring _____	11		
5.5 Opbevaring _____	11		
6 - RESERVEDELE _____	12		
6.1 B-lock hovedstøtte reservedele _____	12		
6.2 B-lock hovedstøtte tilbehør _____	12		
7 - Teknisk support _____	12		
7.1 Teknisk supportservice _____	12		

1 - SIKKERHEDSINFORMATION

Læs denne brugervejledning omhyggeligt. Det er en integreret del af enheden og skal altid opbevares lige ved hånden. Af hensyn til din personlige og patienternes sikkerhed skal du være opmærksom på følgende punkter:

- Før hver brug skal du sikre dig, at der ikke er tegn på slid, beskadigelse og/eller funktionsfejl. Se afsnittet *Inspektion*, side 11.
- For at undgå infektioner og/eller bakteriel kontaminering, følg anvisningerne i afsnittene *Desinfektion* og *Rengøring*, side 11.

1.1 Advarsel

Faresymbolerne gør opmærksom på potentielt farlige situationer, der, hvis de ignoreres, kan resultere i ulykker, skader og/eller personskade.



ADVARSEL

Utrænede brugere kan skade sig selv, forårsage skade og/eller fysisk skade. Tillad kun uddannet og kvalificeret personale at bruge hovedstøtten.

Forkert brug af hovedstøtten kan forårsage skader og/eller kvæstelser. Brug hovedstøtten som beskrevet i denne manual.

Uautoriserede ændringer af hovedstøtten kan forårsage alvorlig skade, personskade og/eller uforudsigelige driftsproblemer. Modificer eller ændre ikke hovedstøtten på nogen måde.

Enhver skade på komponenterne i hovedstøtten eller på hele systemet kan påvirke dets ydeevne og sikkerhed. Efterse hovedstøtten ofte, især før og efter hver brug. Tag hovedstøtten ud af drift, hvis den viser tegn på slid eller beskadigelse.

En uassistet patient risikerer at komme til skade. Lad aldrig patienten være alene og fikseret med hovedstøtten. Assister patienten under alle redningsoperationer.

Lejlighedsvis assistenter kan forårsage skade og/eller fysisk skade eller skade sig selv. Tillad ikke lejlighedsvis assistenter at udføre klargøringen af hovedstøtten. Vær yderst forsigtig, når du bruger enheden, og koordiner eventuelle assistenter.

Forkert vedligeholdelse kan forårsage alvorlige ulykker og/eller skader. Udfør vedligeholdelse som anvist i denne manual.

Brug af ukorrekte og/eller uautoriserede enheder kan forårsage ulykker, skader og/eller personskade. Brug kun enheder, der er godkendt og autoriseret af Ferno srl.

Uautoriserede reparationer udført af personer, der ikke er godkendt af Ferno srl, vil gøre alle garantier ugyldige og kan kompromittere hovedstøttens sikkerhed.

Uoriginale reservedele og utilstrækkelige reparationer kan forårsage skader og/eller kvæstelser. Brug kun originale Ferno-reservedele og referer udelukkende til Ferno srl's kundesupport.

1.2 Vigtigt

Bokse mærket "Vigtigt" indeholder vigtig information om brug og/eller vedligeholdelse af enheden.

Vigtigt

1.3 Blodbårne sygdomme

For at reducere risikoen for eksponering fra infektionssygdomme, der kan overføres med blod, såsom HIV-1 eller Hepatitis, skal du følge instruktionerne om desinfektion og rengøring i denne vejledning omhyggeligt.

1.4 Kompatibilitet

B-lock hovedstøttesystemet kan også bruges på andre spineboards såsom:

Millennia Spineboard og hele Najo-serien.

1.5 Symbolordliste

De symboler, der bruges i denne vejledning, er defineret nedenfor. CE-mærket findes på hovedstøtten og i denne manual.



Læs brugermanualen
omhyggeligt



Hovedstøtten kræver
mindst to kvalificerede
operatører for korrekt brug



Dette produkt opfylder
europæiske Union
Standarder



Må ikke vaskes med højtryksvand



Medicinsk udstyr

2- OPERATORTRÆNING OG FÆRDIGHEDER

2.1 Færdigheder

Operatører, der bruger **hovedstøtten** skal:

- Have specifik erfaring med **patient-håndteringsprocedurer**.
- Besidde **de rette** færdigheder **for** at hjælpe patienten.

2.2 Træning

Operatører er forpligtet til at:

- **Omhyggeligt at læse** og forstå alle oplysninger i denne manual.
- Deltage i et passende kursus i brugen af **hovedstøtten**.
- Øve med **hovedstøtten**, før den bruges i virkelige situationer med patienter.



ADVARSEL

Utrænede brugere kan skade sig selv, forårsage skade og/eller fysisk skade. Tillad kun uddannet og kvalificeret personale at bruge B-lock hovedstøtten.

3 - HOVEDSTØTTEN

3.1 Beskrivelse og tilsigtet anvendelse

B-lock hovedstøtten (mere **simpelt** omtalt som "hovedstøtte" i denne vejledning) er en enhed designet til at immobilisere patientens hoved og nakke.

Hovedstøtten skal bruges i overensstemmelse med de lokale regler.

Hovedstøtten er udstyret med en hovedbagplade, to sideblokke, der kan fastgøres til bagpladen med velcro, to remme (pande og hage) og en "H"-formet velcrostrop til endelig immobilisering på den atraumatiske bære.

HOVEDSTØTTEKOMPONENTER

- Hovedstøtte bagplade (1)
- Sideblokke (2)
- Pande- og hagerem (2)
- "H"-formet velcrostrop (1)



ADVARSEL

Forkert brug af hovedstøtten kan forårsage skader og/eller kvæstelser. Brug B-lock hovedstøtten som beskrevet i denne manual.

3.2 CE-mærkning

Fernos produkter opfylder kravene i den europæiske forordning (EU) 2017/745 (MDR) vedrørende medicinsk udstyr.



3.3 - Komponenter (hovedstøtte)



3.4 Generelle specifikationer

Materialer

Hovedstøtte	Termoplastisk elastomer
"H"-formet velcrostrop	Polypropylen
Pande/hagerem	Neopren
Dimensioner (samlet)	240x300x140mm
Vægt	0,970 kg

BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSMANUAL



For at anmode om yderligere gratis kopier af brugsanvisningen, kontakt venligst Ferno srl kundeservice. (side 2).

4 - BRUG AF HOVEDSTØTTEN

4.1 Brugsanvisning

- Denne manual giver ingen medicinske instruktioner.
- Det er operatørernes ansvar at følge korrekte procedurer og sikre sikkerheden for både patienten og dem selv.
- Denne manual forklarer brugen af **hovedstøtten** under ideelle forhold og er udelukkende vejledende.
- Følg procedurerne, mens du overholder standardreglerne for **forflytning** af patienten i en **akutsituation**.
- Under alle omstændigheder skal du altid overholde de lokale sundhedsanvisninger og regler.



Læs bruger**manualen**
omhyggeligt



Mindst to
kvalificerede **operatører**

Vigtigt

Når den ikke er i brug, opbevares B-lock hovedstøtte indendørs, på et tørt sted beskyttet mod direkte sollys og i opbevaringskonfigurationen (*Opbevaring*, side 12).


4.2 - Anvendelse af hovedstøtte

1. Løft let patientens hoved for at placere **hovedstøttens bundplade** (Figur 2A). Under dette **trin** skal du sørge for at holde patientens hoved på linie.
2. Placer **hovedstøttens bundplade** under patientens hoved. Under dette **trin** skal du sørge for, at **pladen** er korrekt centreret.

Figur 1 - Bundplade placering



2A

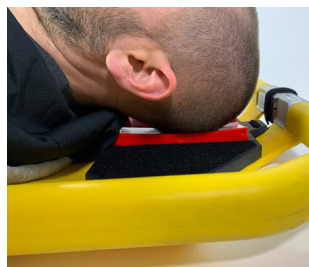

Figur 3 - Placering af sideblokke

3. Placer sideblokkene på kravebenet, så de **sidder tæt** til patientens hoved.



3A



3B

4. Påfør både pande- og hageremme.

Figur 4 - Påsætning af pande- og hageremme



4A



4B

5. Påsæt den "H"-formede velcrostrop, der fastgør **B-lock hovedstøtten** til den atraumatiske bære (Figur 7-8).



Figur 7 - Påsætning af "H"-formet velcrostrop



Figur 8 - Hovedstøtte korrekt påsat med "H"-formet velcrostrop

5 - VEDLIGEHOLDELSE

5.1 Rutinemæssig vedligeholdelse

Hovedstøtten kræver regelmæssig vedligeholdelse. Tabellen til højre viser minimum vedligeholdelsesintervaller.

Hold styr på vedligeholdelsesopgaver. En eksempelliste til registrering af vedligeholdelsesopgaver kan findes på side 18.

5.2 Sanerings- og desinfektionsprocedure

ADVARSLER

- Kemiske midler kan være giftige.
- Tag de nødvendige forholdsregler før brug. Brug egnede **handsker og PPE**.
- Følg instruktionerne og advarslerne på emballagens etiketter og på sikkerhedsdatabladene for hvert kemiske middel.
- Bland ikke desinfektionsmidler eller afkalkningsmidler af forskellig sammensætning.
- Det anbefales at desinficere enheden efter hver brug.
- Rengøring skal udføres efter desinfektion.
- Nedsæk ikke **hovedstøtten** direkte i desinfektionsmiddel.
- Sørg for, at der ikke er tegn på slid og/eller skade under desinfektion.
- Tør med en klud. Sørg for, at alle komponenter i enheden er helt tørre, før de genbruges.
- Efter rengøring skal du sørge for at genmontere remmene og/eller **andet tilbehør, der blev fjernet fra enheden**.

5.3 Desinfektion

Desinficer hele overfladen af **hovedstøtten** med et gennembrøvet desinfektionsmiddel.

ADVARSLER

Rifraxan C er et rengørings-/desinfektionsmiddel, der almindeligvis anvendes i medicinske faciliteter, og som ikke har forårsaget nogen ændring eller skade på Ferno-produkter.

Dette produkt anbefales derfor.

Følg lokale desinfektionsprocedurer, hvis der anvendes forskellige produkter.

Vedligeholdelsesintervaller	Efter hver brug	Hver gang det er nødvendigt	Hver måned
Desinfektion (side 11)	•	•	
Rengøring (side 11)		•	
Inspektion (side 11)	•	•	•



ADVARSEL

Forkert vedligeholdelse kan forårsage alvorlige ulykker og/eller skader. Udfør vedligeholdelse som anvist i denne brugermanual.



ADVARSEL

Hvis der anvendes andre desinfektionsprocedurer end dem, der er specificeret i denne manual, er det brugerens ansvar at udføre effektivitets- og sikkerhedstjek for at undgå mulige risici for patienten.

Vigtigt

Når den ikke er i brug, opbevares B-lock hovedstøtten indendørs, på et tørt sted beskyttet mod direkte sollys og i opbevaringskonfigurationen (*Opbevaring*, side 12).

Vigtigt

VASK IKKE MED HØJTRYKSVAND



Brug ikke højtryksvand til at rense hovedstøtten.

Vigtigt

Brug af produkter, der indeholder phenol og jod, kan beskadige **hovedstøtten**. Brug ikke produkter, der indeholder phenol eller jod til rengøring/desinfektion af **hovedstøtten**.

5.4 Rengøring

Vask **hovedstøtten** med vand og sæbe eller et mildt rengøringsmiddel, og tør den af med en ikke-slibende svamp.

Skyl med rent vand.

Tør med en klud eller lad lufttørre.

Vask ikke med højtryksvand.

Ved desinficering og rengøring skal du være meget opmærksom på velcro-systemer.

Sørg for, at de beholder deres **evne til at holde sammen** og fungerer korrekt.

CHECKLISTE TIL INSPEKTION AF HOVEDSTØTTE

- Er alle hovedstøttens komponenter til stede?
- Viser **hovedstøtten** tegn på beskadigelse og/eller slid?
- Er der snit og utætheder af indvendigt materiale på **hovedstøtten**?
- Er pandestroppen, hagebeskytteren og den "H"-formede velcro-rem i god **stand**? Viser de snit eller slidte kanter?
- Fungerer velcrosystemerne korrekt?
- Viser velcrosystemerne tegn på slid? Har de **stadig evnen til at holde sammen**?

5.5 Opbevaring

Hovedstøtten skal opbevares ren, indendørs, på et tørt sted og væk fra direkte sollys. Når den ikke er i brug, skal den opbevares i **opbevaringskonfigurationen** (Figur 9).

Figur 9 - Opbevaringskonfiguration



TILPASNING TIL ANDEN SPINAL STØTTE

Hovedstøtten er designet til at blive brugt med Ferno SCOOPEXL™ atraumatisk bære, med Ferno Millennia spineboard og med Najo-serien.

Enhver anden kombination, der ikke inkluderer produkter fra Ferno-serien, må kun bruges, efter at brugeren har kontrolleret den absolutte kompatibilitet med **hovedstøtten** og overensstemmelsen med standarden EN 1865.

Ferno srl er ikke ansvarlig for skader på brugere eller tredjeparter på grund af forkert brug af B-lock hovedstøtte.



6 - RESERVEDELE

Ferno tilbyder originale reservedele godkendt til B-lock hovedstøtten. Følg altid anvisningerne i denne brugsanvisning.

For mere produktinformation, kontakt Ferno kundeservice (side 2).



ADVARSEL

Brug af ukorrekte og/eller uautoriserede enheder kan forårsage ulykker, skader og/eller personskade. Brug kun enheder, der er godkendt og autoriseret af Ferno srl.

6.1 B-lock hovedstøtte reservedele

Beskrivelse	Kode
SIDEBLOKKE (par)	kode 25-00059
PANDE/HAGEREM (sælges i par)	kode 25-00085
BUNDPLADE (inklusive mini QHI)	kode 25-00058
MINI QHI	kode 10-00289
H-FORMET STROP	kode 25-0059-002

6.2 B-lock hovedstøtte tilbehør

Beskrivelse	Kode
Taske til B-lock hovedstøtte transport/opbevaring	10-9900-005

7 - TEKNISK SUPPORT

7.1 Teknisk support

For teknisk support vedrørende vores produkter, kontakt Ferno srl Tekniske Support Service.

Telefon (gratis i Italien)	800.501.711
telefon	+ 39 0516860028
Fax	+39 0516861508
E-mail	info@ferno.it
Website	www.ferno.it

Kontakt Ferno srl kundeservice for information om brugen af **B-lock hovedstøtten** og planlægning af kurser i korrekt brug af enheden.



ADVARSEL

Uoriginale reservedele og utilstrækkelige reparationer kan forårsage skader og/eller kvæstelser. Brug kun originale Ferno reservedele og henvend dig udelukkende til Ferno srl's kundeservice.



ADVARSEL

Uautoriserede ændringer af B-lock hovedstøtten kan forårsage alvorlig skade, personskade og/eller uforudsigelige driftsproblemer. Modificer eller ændre ikke hovedstøtten på nogen måde.

8 - GARANTI

8.1 Garantivilkår og betingelser

Ferno's produkter er garanteret mod fabrikationsfejl i en periode på 24 måneder fra datoen på Ferno srl's forsendelsesdokument.

Ferno garanterer **for** sine reservedele i en periode på 12 måneder. I løbet af garantiperioden vil Ferno gratis reparere og/eller udskifte dele, der viser sig at have fabrikationsfejl, eksklusive omkostninger til arbejdskraft, rejser, transport og emballering.

Garantien dækker ikke forbrugsvarer eller dele, der er udsat for slitage på grund af normal brug af produktet, alle dele, der typisk er udsat for glidende eller rullende friktion (lejer, børster, smøremidler, sko, skinner osv.), dele, der potentielt er udsat for oxidation eller korrosion (kobber- eller metallegeringskontakter, elektrisk, elektronisk og mekanisk udstyr) og batterier.

Overfladebehandlingen (gelcoat/harpiks, maling, pulvermaling, **mærkater**, tape, inskriptioner osv.) er garanteret i 90 dage.

Reparationer udføres af uddannet teknisk personale **hos** Ferno srl i Via Zallone 26- 40066 Pieve di Cento (BO), Italien eller hos kunden, hvis passende aftaler med Ferno srl's kundeservice er blevet truffet.

Teknisk support hos Kunden skal arrangeres på forhånd og indebærer refusion af afholdte omkostninger og dokumenteret efter anmodning. For information om omkostningerne ved teknisk support, kontakt venligst den relevante afdeling hos Ferno srl.

Reparationer er garanteret i 6 måneder fra reparationsdatoen. Denne garanti gælder kun, når produktet bruges i overensstemmelse med instruktionerne i den medfølgende brugervejledning. Misbrug og uagtsomhed gør denne garanti ugyldig.

Garantien er gældende fra den dag, produktet afsendes fra Ferno srl, og fragtomkostningerne er ikke dækket af denne garanti. Ferno srl er ikke ansvarlig for skader opstået under forsendelse eller på grund af misbrug af produktet.

Produkter solgt af Ferno srl, som ikke bærer Ferno-varemærket, er dækket af den originale producents garanti. Ferno srl forlænger ikke andre producenters garantiperioder; Ferno srl påtager sig intet ansvar for produkter fremstillet af andre.

Garantien er ugyldig i tilfælde af:

- manglende overholdelse af betjeningsvejledningen,
- misbrug,
- u hensigtsmæssig brug eller håndtering,
- reparationer udført af ikke-autoriserede personer,
- transportskader på grund af forkert emballering af varer returneret af brugeren,
- utilstrækkelig vedligeholdelse,
- manglende brug af originale reservedele.

I tilfælde, der ikke er dækket af garantien, dækker Ferno ikke transportomkostningerne for afsendelse eller returnering af produktet.

8.2 Ansvarsbegrænsning

Hvis et produkt viser sig at være defekt, vil Ferno srl reparere og erstatte det, eller efter vores eget skøn refundere købsprisen. Under ingen omstændigheder kan Ferno srl holdes ansvarlig for mere end salgsprisen for produktet. Køber accepterer disse betingelser for alle typer skader. Ferno srl tilbyder ikke andre garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, eller nogen underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål for sine egne produkter eller **dem** fremstillet

af andre. I tilfælde af krænkelse af den begrænsede garanti skal enhver retssag anlægges inden for et år fra den dato, hvor krænkelsen blev eller burde være blevet opdaget. Ferno srl forbeholder sig retten til at ophæve garantien for de solgte produkter:

- hvis etiketter eller plader, der bærer producentens logo og/eller serie- eller registreringsnummer, er gjort ulæselige eller **er fjernet**;
 - hvis produktet har gennemgået ændringer, reparationer eller behandlinger, der ikke er godkendt af Ferno srl og af personale, der ikke er autoriseret af Ferno;
 - hvis produktet ikke anvendes i overensstemmelse med instruktionerne eller til andre formål end det er designet til.
- **i henhold** til betingelserne angivet i afsnit 8.1, "Garantivilkår og -betingelser".

Ferno srl kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge af brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i brugermanualen eller det tilsigtede formål med produktet.

8.3 Garantikrav

Kontakt Ferno's kundeservice med det samme, hvis du modtager et produkt, der er mistænkt for at være defekt. En repræsentant vil hjælpe kunden gennem klageproceduren. Inden du returnerer et produkt til Ferno srl, skal du kontakte Ferno's kundeservice for at anmode om autorisation.

8.4 Klager

Eventuelle klager skal meddeles til forhandleren eller til Ferno srl's kundeservice inden for 5 dage efter modtagelse af produktet eller efter opdagelse af den påståede defekt.

Krav eller tvister vedrørende et enkelt produkt fritager ikke køber for forpligtelsen til at afhente og betale for andre produkter i ordren, medmindre andet er aftalt med sælger.

8.5 Returgodkendelse

Intet produkt vil blive accepteret uden forudgående godkendelse fra Ferno srl.

Produkter, der returneres af forretningsmæssige årsager eller af årsager, der ikke er relateret til manglende overensstemmelse, vil kun blive accepteret efter verificering af deres tilstand af Ferno srl's kvalificerede personale.

[illegible]

*Produkt bruger- og vedligeholdelsesmanual, krævet for at betjene produktet sikkert, bevare dets effektivitet og pålidelighed,
og overholde betingelserne i garantien.*

Rel.08042022
dansk

Ferno srl

Via Benedetto Zallone 26 40066 -

Pieve di Cento (BO) - ITALIEN

Telefon (gratis i Italien)	800.501.711
Telefon	+ 39 0516860028
Fax	+39 0516861508
E-mail	info@ferno.it
Website	www.ferno.it