


Model 418-1 Lifting Bridle

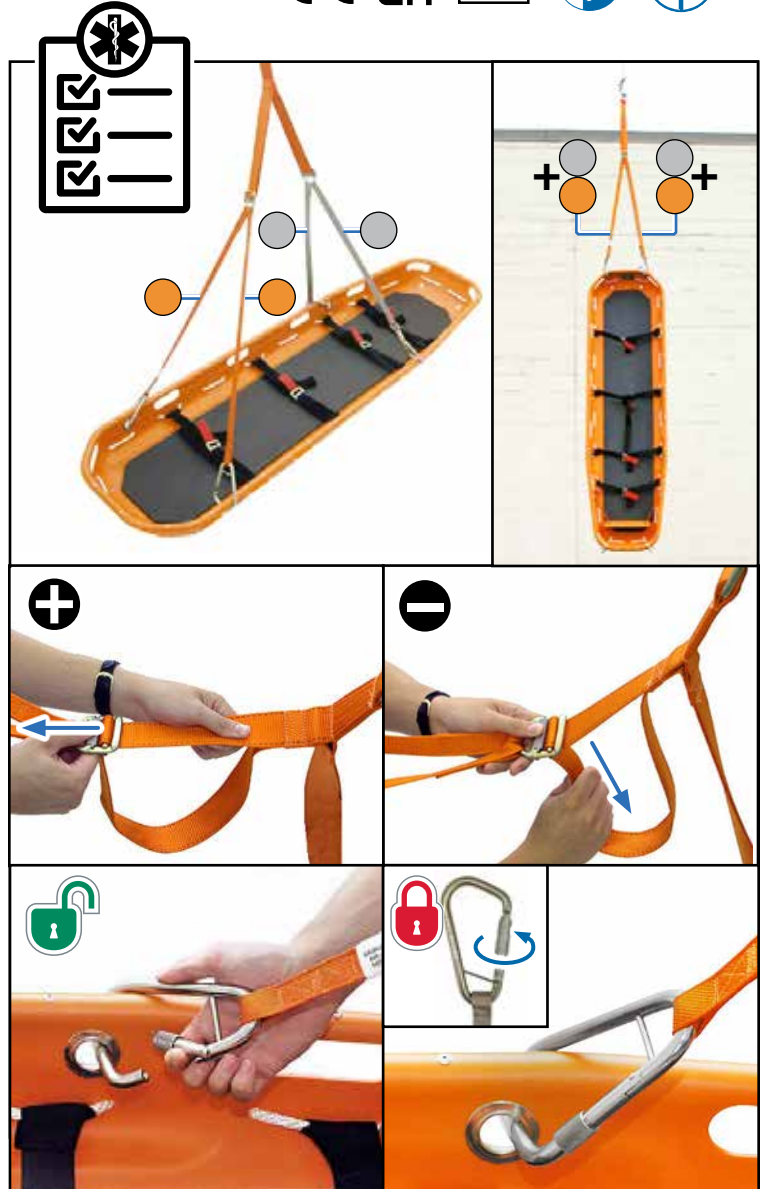


Product	
A	54.5" (1384 mm)
B	34.5" (876 mm)
C	2.625" (67 mm)
D	3" (76 mm)

	5 lb (2 kg)
--	-------------

	600 lb (272 kg)
--	-----------------

	-40°F-140°F (-40°C-60°C)
--	--------------------------

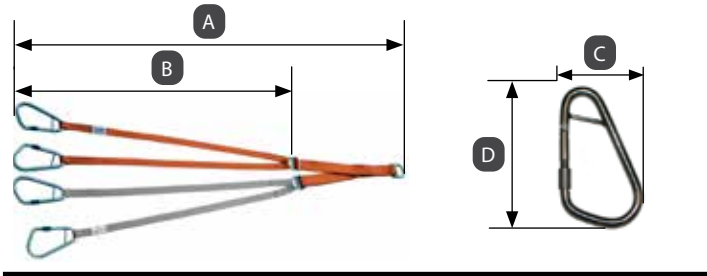

Ferno-Washington, Inc.
70 Weil Way
Wilmington, OH 45177-9371, U.S.A.
1.937.382.1451



FERNO S.r.l.
Via B. Zallone n.26
40066 Pieve di Cento (BO), Italy
+39 (051) 6860028



Ferno (UK) Ltd.
Ferno House, Stubbs Beck Lane, Cleckheaton,
West Yorkshire, BD19 4TZ, UK
+44 (0) 1274 851 999



Description

Model 418-1 is an adjustable lifting bridle designed to be used as an interface between a basket stretcher and a rope hoist, cable, or other lifting device. It is compatible with Ferno models 71 and 71-S basket stretchers.

Maximum range of adjustment for each leg is 11" (279 mm). Maximum separation of the legs (gray and orange) is 100" (254 cm).

General Guidelines for Use

Medical advice is beyond the parameters of this manual. It is the operators' responsibility to ensure safe practices during use of the product. A minimum of two trained operators is required. Operators must:

- Read and understand this manual.
- Train and practice on proper use of the product following standard emergency patient-handling procedures. Keep training records.
- Rescue procedures using the lifting bridle require special skills and are potentially hazardous activities. Do not attempt rescue procedures unless operators have received professional instruction and training.
- Inspect the product and confirm it is in good condition.
- Communicate with one another and use coordinated movements to maintain control of the product. Stay with the patient at all times.
- Make sure all equipment used with the bridle has a load rating at least equivalent to that of the bridle.
- Secure patient in the stretcher using approved restraints (not included).
- For horizontal lifting, attach gray legs at one end of the stretcher and orange legs at the opposite end.
- For vertical lifting, attach one gray and one orange leg at each side.
- Secure lifting bridle to approved attachment points on the stretcher by fully tightening locking sleeve to carabiner nose.
- Store bridle in a dry place away from direct sunlight.

Disinfecting and Cleaning

Remove the bridle from the stretcher before cleaning and disinfecting.



Wipe all surfaces with disinfectant. Follow the disinfectant manufacturer's instructions for application method and contact time.



Hand clean with warm water and a mild detergent. Rinse with warm, clear water. Dry with a towel or allow it to air-dry. When completely dry, lubricate carabiners with WRL-191-S synthetic lubricant or a multi-purpose grease.

Ferno Customer Relations

For ordering assistance or general information, contact your Ferno distributor or Ferno Customer Relations.

Information www.ferno.com
 Authorized Service and Support ferno.com/service-and-support

U.S., Canada	1.877.733.0911
International	+1.937.382.1451
Fax	1.888.388.1349



Complete English Users' Manual available at: www.ferno.com.

PATENTS
ferno.com/patents

WARNING

Professional use by trained operators only. Use the product only for its intended purpose.

Improper use, operation, or maintenance can cause injury. Use, operate, and maintain only as instructed.

An unattended or unrestrained patient can be injured. Always stay with the patient and use patient restraints.

Improper modifications, or items not designed for the product can cause injury. Attach only approved items. Do not modify the product.

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Follow training protocol		Load capacity
	Disinfecting		Product weight
	Cleaning		Temperature range

NOTICE

Do not use disinfectants or cleaners containing phenolics or iodines. If bleach is used, rinse with plenty of clear water to remove bleach residue.

Do not use abrasive materials to clean the product.

Wash by hand. Do not wash bridle by washing-machine action.

Inspection Checklist

- Are all components present, in good condition, and free of excessive wear?
- Is webbing in good condition with no cuts or frayed edges?
- Are V-shaped rings, carabiners, and lifting ring true to their original shape and free of cracks and gouges?
- Are carabiners free of visible damage, with hinge pins securely in place, and do they operate properly?

If inspection shows damage or excessive wear, remove from service and replace.

Adverse Event Notice

In the event of an adverse event or serious incident related to the use of this device, the end user/operator must report the incident to Ferno at 1-877-733-0911 or via email at tscoordinator@ferno.com. If the incident occurred outside of the U.S., report it to Ferno's Authorized Representative for that area.

Disposal

Prior to disposal, clean and disinfect the product according to instructions in this manual. Recycle or dispose of the product following local protocols and regulations. Do not dispose of the product in municipal waste.

Beskrivelse

Model 418-1 er en justerbar løftetøjle designet til at blive brugt som en grænseflade mellem en kurvebærer og et rebtalje, kabel eller anden løfteanordning. Den er kompatibel med Ferno modellerne 71 og 71-S kurvbærer.

Maksimal justeringsområde for hvert ben er 11" (279 mm). Maksimal adskillelse af benene (grå og orange) er 100" (254 cm).

Generelle retningslinjer for brug

Medicinsk rådgivning ligger uden for parametrene i denne manual. Det er operatørernes ansvar at sikre sikker praksis under brug af produktet. Der kræves minimum to uddannede operatører. Operatører skal:

- Læs og forstå denne manual.
- Træn og øv dig i korrekt brug af produktet ved at følge standardprocedurer for akut patienthåndtering. Før træningsoptegnelser.
- Redningsprocedurer ved hjælp af løftetøjlen kræver særlige færdigheder og er potentielt farlige aktiviteter. Forsøg ikke redningsprocedurer, medmindre operatørerne har modtaget professionel instruktion og træning.
- Undersøg produktet og bekræft, at det er i god stand.
- Kommuniker med hinanden og brug koordinerede bevægelser for at bevare kontrollen over produktet. Bliv altid hos patienten.
- Sørg for, at alt udstyr, der bruges sammen med tøjlen, har en belastningsværdi, der mindst svarer til tøjleens.
- Fastgør patienten i båren med godkendte fastholdelsesanordninger (medfølger ikke).
- Ved vandrette løft fastgøres grå ben i den ene ende af båren og orange ben i den modsatte ende.
- Til lodrette løft skal du fastgøre et gråt og et orange ben på hver side.
- Fastgør løftetøjle til godkendte fastgørelsespunkter på båren ved at stramme låsebøsningen helt til karabinhæsen.
- Opbevar tansen på et tørt sted væk fra direkte sollys.

Desinficering og rengøring

Fjern tansen fra båren før rengøring og desinficering.



Tør alle overflader af med desinfektionsmiddel. Følg desinfektionsmiddelproducentens instruktioner for påføringsmetode og kontakttid.



Håndrens med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Skyl med varmt, klart vand. Tør med et håndklæde eller lad det lufttørre. Når de er helt tørre, smøres karabinhagerne med WRL-191-S syntetisk smøremiddel eller et multifunktionsfedt.

Fernos kundeforhold

For bestillingshjælp eller generel information, kontakt din Ferno-distributør eller Ferno-kunderelationer.

Information www.ferno.com
 Autoriseret service og support ferno.com/service-and-support

USA, Canada	1.877.733.0911
International	+ 1.937.382.1451
Fax	1.888.388.1349



Komplet engelsk brugermanual tilgængelig på: www.ferno.com.

PATENTS
ferno.com/patents

⚠ ADVARSEL

Kun professionel brug af uddannede operatører. Brug kun produktet til dets tilsigtede formål.

Forkert brug, betjening eller vedligeholdelse kan forårsage personskade. Brug, betjening og vedligehold kun som anvist.

En uovervåget eller uhammet patient kan komme til skade. Bliv altid hos patienten og brug patientfastholdelsesanordninger.

Ukorrekte ændringer eller genstande, der ikke er designet til produktet, kan forårsage personskade. Vedhæft kun godkendte varer. Modificer ikke produktet.

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Følg træningsprotokol		Belastningskapacitet
	Desinficerer		Produktets vægt
	Rensning		Temperaturområde

MEDDELELSE

Brug ikke desinfektionsmidler eller rengøringsmidler, der indeholder fenoler eller jod. Hvis der bruges blegemiddel, skylles med rigeligt rent vand for at fjerne blegemiddelrester.

Brug ikke slibende materialer til at rengøre produktet.

Vask i hånden. Vask ikke tansen ved hjælp af vaskemaskine.

Kontroltjekliste

- Er alle komponenter til stede, i god stand og fri for overdreven slid?
- Er webbing i god stand uden snit eller flossede kanter?
- Er V-formede ringe, karabinhager og løftering tro mod deres oprindelige form og fri for revner og huller?
- Er karabinhager fri for synlige skader, med hængselstifter sikkert på plads, og fungerer de korrekt?

Hvis inspektion viser beskadigelse eller overdreven slitage, tages ud af drift og udskiftes.

Meddelelse om uønskede hændelser

I tilfælde af en uønsket hændelse eller alvorlig hændelse relateret til brugen af denne enhed, skal slutbrugeren/operatøren rapportere hændelsen til Ferno på 1-877-733-0911 eller via e-mail på tscoordinator@ferno.com. Hvis hændelsen fandt sted uden for USA, skal du rapportere det til Fernos autoriserede repræsentant for det pågældende område.

Bortskaffelse

Før bortskaffelse skal produktet rengøres og desinficeres i henhold til instruktionerne i denne vejledning. Genbrug eller bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale protokoller og regler. Smid ikke produktet i husholdningsaffaldet.

Kuvaus

Malli 418-1 on säädettävä nostosuitset, joka on suunniteltu käytettäväksi liittänä koripaarien ja köysinostimen, kaapelin tai muun nostolaitteen välillä. Se on yhteensopiva Ferno mallien 71 ja 71-S koripaarien kanssa.

Kunkin jalan maksimisäätöalue on 11" (279 mm). Jalkojen enimmäisetäisyys (harmaa ja oranssi) on 100" (254 cm).

Yleiset käyttöohjeet

Lääkietieteelliset neuvot ovat tämän oppaan parametrien ulkopuolella. Käyttäjien vastuulla on varmistaa turvalliset käytännöt tuotteen käytön aikana. Vähintään kaksi koulutettua kuljettajaa vaaditaan. Operaattoreiden tulee:

- Lue ja ymmärrä tämä käyttöopas.
- Kouluta ja harjoittele tuotteen oikeaa käyttöä noudattamalla tavallisia kiireellisiä potilaan käsittelymenetelmiä. Pidä harjoituskirjaa.
- Pelastustoimenpiteet nostosuitsilla vaativat erityistaitoja ja ovat mahdollisesti vaarallisia toimia. Älä yritä pelastustoimenpiteitä, elleivät käyttäjät ole saaneet ammattimaista opetusta ja koulutusta.
- Tarkista tuote ja varmista, että se on hyvässä kunnossa.
- Kommunikoiki keskenään ja käytä koordinoituja liikkeitä tuotteen hallinnan ylläpitämiseksi. Pysy potilaan kanssa koko ajan.
- Varmista, että kaikkien suitsien kanssa käytettävien varusteiden kuormitus on vähintään sama kuin suitsien.
- Kiinnitä potilas paareihin hyväksytyillä kiinnitysvälineillä (ei sisälly).
- Vaakasuoraa nostoa varten kiinnitä harmaat jalat paareiden toiseen päähän ja oranssit jalat vastakkaiseen päähän.
- Pystysuoraa nostamista varten kiinnitä yksi harmaa ja yksi oranssi jalka kummallekin puolelle.
- Kiinnitä nostosuitset paarien hyväksytyihin kiinnityskohtiin kiristämällä kokonaan sulkurenkaan nokan lukitusholkki.
- Säilytä suitset kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta.

Desinfiointi ja puhdistus

Irrota suitset paarista ennen puhdistusta ja desinfiointia.



Pyyhi kaikki pinnat desinfiointiaineella. Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita levitysmenetelmästä ja kosketusajasta.



Käsinpesu lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Huuhtelee lämpimällä, kirkkaalla vedellä. Kuivaa pyyhkeellä tai anna kuivua ilmassa. Kun karabiinit ovat täysin kuivia, voitele karabiinit synteettisellä WRL-191-S-voiteluaineella tai monikäyttörasvalla.

Fernon asiakassuhteet

Tilausapua tai yleisiä tietoja varten ota yhteyttä Ferno-jälleenmyyjäsi tai Fernon asiakassuhteisiin.

Tiedot www.ferno.com
Valtuutettu huolto ja tuki ferno.com/service-and-support

USA, Kanada	1.877.733.0911
Kansainvälinen	+ 1 937 382 1451
Faksi	1.888.388.1349



Täydellinen englanninkielinen käyttöopas saatavilla osoitteessa: www.ferno.com.

PATENTS
ferno.com/patents

VAROITUS

Vain koulutettujen käyttäjien ammattikäyttöön. Käytä tuotetta vain sen aiottuun tarkoitukseen.

Väärä käyttö, käyttö tai huolto voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä, käytä ja huoltaa vain ohjeiden mukaisesti.

Valvoton tai kiinnittämätön potilas voi loukkaantua. Pysy aina potilaan kanssa ja käytä potilaan turvalaitteita.

Väärät muutokset tai tuotteet, joita ei ole suunniteltu tuotteeseen, voivat aiheuttaa loukkaantumisen. Liitä vain hyväksytyjä kohteita. Älä muokkaa tuotetta.

Symboli	Määritelmä	Symboli	Määritelmä
	Noudata harjoitusprotokollaa		Kantavuus
	Desinfiointi		Tuotteen paino
	Puhdistus		Lämpötila-alue

HUOMAUTUS

Älä käytä fenoleja tai jodia sisältäviä desinfiointi- tai puhdistusaineita. Jos käytät valkaisuainetta, huuhtelee runsaalla kirkkaalla vedellä valkaisuainejäämien poistamiseksi.

Älä käytä hankaavia materiaaleja tuotteen puhdistamiseen.

Pese käsin. Älä pese suitset pesukoneella.

Tarkastuksen tarkistuslista

- Ovatko kaikki osat mukana, hyvässä kunnossa ja vailla liiallista kulumista?
- Onko nauha hyvässä kunnossa ilman viiltoja tai rispaantuneita reunoja?
- Ovatko V:n muotoiset renkaat, karabiinit ja nostorengas alkuperäisen muotonsa mukaisia ja niissä ei ole halkeamia ja kolhuja?
- Ovatko karabiinit ilman näkyviä vaurioita, saranatapid tukevasti paikoillaan ja toimivatko ne kunnolla?

Jos tarkastuksessa havaitaan vaurioita tai liiallista kulumista, poista se käytöstä ja vaihda.

Ilmoitus haittavaikutuksista

Jos tämän laitteen käyttöön liittyy haittatapahtuma tai vakava vaaratilanne, loppukäyttäjän/ operaattorin on ilmoitettava tapahtumasta Fernolle numeroon 1-877-733-0911 tai sähköpostitse osoitteeseen scordinator@ferno.com. Jos tapaus sattui Yhdysvaltojen ulkopuolella, ilmoita siitä Fernon valtuutetulle edustajalle kyseisellä alueella.

Hävittäminen

Ennen hävittämistä puhdista ja desinfioi tuote tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä tai hävitä tuote paikallisten käytäntöjen ja määräysten mukaisesti. Älä hävitä tuotetta yhdyskuntajätteen mukana.

Beskrivelse

Modell 418-1 er et justerbart løftehodlag designet for å brukes som et grensesnitt mellom en kurvåre og en tauløfter, kabel eller annen løfteanordning. Den er kompatibel med Ferno-modellene 71 og 71-S kurvårer.

Maksimal justeringsområde for hvert ben er 11" (279 mm). Maksimal separasjon mellom bena (grå og oransje) er 100" (254 cm).

Generelle retningslinjer for bruk

Medisinsk råd er utenfor parametrene i denne håndboken. Det er operatørens ansvar å sørge for sikker praksis under bruk av produktet. Det kreves minimum to opplærte operatører. Operatører må:

- Les og forstå denne håndboken.
- Tren og øv på riktig bruk av produktet ved å følge standard prosedyrer for akutt pasienthåndtering. Hold treningsjournaler.
- Redningsprosedyrer ved bruk av løftehodlag krever spesielle ferdigheter og er potensielt farlige aktiviteter. Ikke forsøk redningsprosedyrer med mindre operatører har mottatt profesjonell instruksjon og opplæring.
- Inspiser produktet og bekreft at det er i god stand.
- Kommuniser med hverandre og bruk koordinerte bevegelser for å opprettholde kontroll over produktet. Vær hos pasienten til enhver tid.
- Sørg for at alt utstyr som brukes med hodlaget har en belastningsgrad som minst tilsvarer hodlaget.
- Sikre pasienten i båren med godkjente fester (ikke inkludert).
- For horisontale løft, fest grå ben i den ene enden av båren og oransje ben i motsatt ende.
- For vertikale løft, fest ett grått og ett oransje ben på hver side.
- Fest løftehodlaget til godkjente festepunkter på båren ved å stramme låsehylsen helt til karabinnen.
- Oppbevar hodlaget på et tørt sted vekk fra direkte sollys.

Desinfisering og rengjøring

Fjern hodlaget fra båren før rengjøring og desinfisering.



Tørk av alle overflater med desinfeksjonsmiddel. Følg desinfeksjonsmiddelproduktens instruksjoner for påføringsmetode og kontakttid.



Håndvask med varmt vann og et mildt rengjøringsmiddel. Skyll med varmt, klart vann. Tørk med et håndkle eller la det lufttørke. Når den er helt tørr, smør karabinkrokene med WRL-191-S syntetisk smøremiddel eller et universalfett.

Ferno Kunderelasjoner

For bestillingshjelp eller generell informasjon, kontakt din Ferno-distributør eller Fernos kundekontakt.

Informasjon www.ferno.com
 Autorisert service og support ferno.com/service-and-support

USA, Canada	1.877.733.0911
Internasjonal	+ 1.937.382.1451
Faks	1.888.388.1349



Komplett engelsk brukerhåndbok
 tilgjengelig på www.ferno.com.

PATENTS
ferno.com/patents

⚠ ADVARSEL

Profesjonell bruk kun av opplærte operatører. Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet.

Feil bruk, drift eller vedlikehold kan forårsake skade. Bruk, bruk og vedlikehold kun som instruert.

En uovervåket eller uhemmet pasient kan bli skadet. Vær alltid hos pasienten og bruk pasientsikringer.

Feilaktige modifikasjoner eller gjenstander som ikke er designet for produktet kan forårsake skade. Legg kun ved godkjente varer. Ikke modifier produktet.

Symbol	Definisjon	Symbol	Definisjon
	Følg treningsprotokollen		Lastekapasitet
	Desinfiserer		Produktvekt
	Rengjøring		Temperaturområde

MERKNAD

Ikke bruk desinfeksjonsmidler eller rengjøringsmidler som inneholder fenoler eller jod. Hvis blekemiddel brukes, skyll med mye rent vann for å fjerne blekemiddelrester.

Ikke bruk skurende materialer for å rengjøre produktet.

Vask for hånd. Ikke vask hodlaget ved hjelp av vaskemaskin.

Sjekkliste for inspeksjon

- Er alle komponenter til stede, i god stand og fri for overdreven slitasje?
- Er webbing i god stand uten kutt eller frynsete kanter?
- Er V-formede ringer, karabinkroker og løftering tro mot sin opprinnelige form og fri for sprekker og groper?
- Er karabiner fri for synlige skader, med hengselstifter sikkert på plass, og fungerer de som de skal?

Hvis inspeksjon viser skade eller overdreven slitasje, må den tas ut av drift og erstattes.

Melding om uønsket hendelse

I tilfelle en uønsket hendelse eller alvorlig hendelse relatert til bruken av denne enheten, må sluttbrukeren/operatøren rapportere hendelsen til Ferno på 1-877-733-0911 eller via e-post på tscoordinator@ferno.com. Hvis hendelsen skjedde utenfor USA, rapporter den til Fernos autoriserte representant for det området.

Avhending

Før avhending, rengjør og desinfiser produktet i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Resirkuler eller kast produktet i henhold til lokale protokoller og forskrifter. Ikke kast produktet i kommunalt avfall.

Beskrivning

Modell 418-1 är ett justerbart lyftträns designat för att användas som gränssnitt mellan en korgsträckare och en lintelja, kabel eller annan lyftanordning. Den är kompatibel med Ferno modellerna 71 och 71-S korgsträckare.

Maximalt justeringsområde för varje ben är 11" (279 mm). Maximal avstånd mellan benen (grå och orange) är 100" (254 cm).

Allmänna riktlinjer för användning

Medicinsk rådgivning ligger utanför parametrarna i denna manual. Det är operatörernas ansvar att säkerställa säker praxis under användning av produkten. Minst två utbildade operatörer krävs. Operatörer måste:

- Läs och förstå denna manual.
- Träna och öva på korrekt användning av produkten enligt standardprocedurer för akut patienthantering. Håll träningsjournaler.
- Räddningsförfaranden med hjälp av lyfttygeln kräver speciella färdigheter och är potentiellt farliga aktiviteter. Försök inte rädda om inte operatörerna har fått professionell instruktion och utbildning.
- Inspektera produkten och bekräfta att den är i gott skick.
- Kommunicera med varandra och använd koordinerade rörelser för att behålla kontrollen över produkten. Var alltid hos patienten.
- Se till att all utrustning som används med tygeln har en belastningsgrad som minst motsvarar tygelns.
- Säkra patienten i baren med godkända fasthållningsanordningar (ingår ej).
- För horisontella lyft, fäst gråa ben i ena änden av baren och orangea ben i motsatta änden.
- För vertikala lyft, fäst ett grått och ett orange ben på varje sida.
- Fäst lyfttränsen på godkända fästpunkter på baren genom att dra åt låshylsan helt mot karbinnoson.
- Förvara tränsen på en torr plats borta från direkt solljus.

Desinficering och rengöring

Ta bort tränsen från baren innan rengöring och desinficering.



Torka av alla ytor med desinfektionsmedel. Följ desinfektionsmedelstillverkarens instruktioner för appliceringsmetod och kontakttid.



Rengör för hand med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Skölj med varmt, klart vatten. Torka med en handduk eller låt den lufttorka. När de är helt torra, smörj karbinhakar med syntetiskt smörjmedel WRL-191-S eller ett universalfett.

Ferno kundrelationer

För att beställa hjälp eller allmän information, kontakta din Ferno-distributör eller Fernos kundrelationer.

Information www.ferno.com
Auktoriserad service och support ferno.com/service-and-support

USA, Kanada	1.877.733.0911
Internationell	+ 1.937.382.1451
Fax	1.888.388.1349



Komplett engelsk användarmanual tillgänglig på www.ferno.com.

PATENTS
ferno.com/patents

⚠ VARNING

Professionell användning endast av utbildade operatörer. Använd produkten endast för dess avsedda ändamål.

Felaktig användning, användning eller underhåll kan orsaka skador. Använd, använd och underhåll endast enligt instruktionerna.

En obehövad eller ohämmad patient kan skadas. Var alltid hos patienten och använd patientskydd.

Felaktiga modifieringar eller föremål som inte är designade för produkten kan orsaka skada. Bifoga endast godkända föremål. Modifiera inte produkten.

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Följ träningsprotokollet		Lastkapacitet
	Desinficerar		Produktens vikt
	Rengöring		Temperaturområde

VARSEL

Använd inte desinfektionsmedel eller rengöringsmedel som innehåller fenoler eller jod. Om blekmedel används, skölj med mycket rent vatten för att avlägsna blekmedelsrester.

Använd inte slipande material för att rengöra produkten.

Tvätta för hand. Tvätta inte tränsen med tvättmaskin.

Kontrollchecklista

- Finns alla komponenter närvarande, i gott skick och fria från överdrivet slitage?
- Är webbing i gott skick utan skärsår eller slitna kanter?
- Är V-formade ringar, karbinhakar och lyfttringar trogna sin ursprungliga form och fria från sprickor och skårer?
- Är karbinhakar fria från synliga skador, med gängjärnssprintar säkert på plats och fungerar de korrekt?

Om inspektionen visar skador eller överdrivet slitage, ta ur drift och byt ut.

Meddelande om biverkningar

I händelse av en negativ händelse eller allvarlig incident relaterad till användningen av denna enhet måste slutanvändaren/operatören rapportera incidenten till Ferno på 1-877-733-0911 eller via e-post på tscoordinator@ferno.com. Om incidenten inträffade utanför USA, rapportera den till Fernos auktoriserade representant för det området.

Förfogande

Före kassering, rengör och desinficera produkten enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Återvinn eller kassera produkten enligt lokala protokoll och föreskrifter. Släng inte produkten i det kommunala avfallet.

