



FWEWBLS
Ferno Walkbelt



FERNO®



Brugervejledning

Dok. ID. 00464-V3 / maj 2023

Ansvarsfraskrivelse

Denne manual indeholder generelle instruktioner for brug, betjening og pleje af dette produkt. Instruktionerne er ikke altomfattende. Sikker og korrekt brug af dette produkt er udelukkende efter brugerens skøn.

Sikkerhedsinformation er inkluderet som en service til brugeren. Alle andre sikkerhedsforanstaltninger, som tages af brugeren, bør være inden for og under hensyntagen til gældende regler og lokal protokol. Der skal gives træning i korrekt brug af dette produkt, før dette produkt bruges i en faktisk situation.

Gem denne vejledning til fremtidig reference. Inkluder det med produktet i tilfælde af overførsel til nye brugere. Yderligere gratis kopier er tilgængelige efter anmodning fra Customer Relations.

Ejendomsretsmeddelelse

Oplysningerne i denne vejledning tilhører Ferno Australia Pty Ltd. Ferno Australia Pty Ltd forbeholder sig alle intellektuelle ejendomsrettigheder, proprietære designrettigheder, fremstillingsrettigheder, brugsrettigheder til reproduktion og salgsbrugsrettigheder hertil og til enhver artikel, der er beskrevet deri, undtagen til i det omfang disse rettigheder udtrykkeligt er givet til andre, eller hvor det ikke er relevant for leverandørens ejendomsretlige dele.

Begrænset garantierklæring

Produkterne solgt af Ferno er dækket af en begrænset garanti. De fuldstændige vilkår og betingelser for den begrænsede garanti og begrænsningerne af ansvar og ansvarsfraskrivelse er også tilgængelige efter anmodning ved at kontakte Ferno Australia via e-mail: info.au@ferno.com.

Meddelelse om uønskede hændelser

I tilfælde af en uønsket hændelse eller alvorlig hændelse relateret til brugen af denne enhed, skal slutbrugeren/operatøren rapportere hændelsen til Ferno Australia, 11 Johnstone Road, Brendale Queensland 4500 Australien, +61 7 3881 4999 eller via e-mail til info.au@ferno.com. Hvis hændelsen fandt sted i Den Europæiske Union, skal du rapportere den til Fernos autoriserede EU-repræsentant og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor slutbrugeren er etableret.



BRUGERVEJLEDNINGER

For at anmode om yderligere gratis brugervejledninger, kontakt Ferno Customer Relations, din Ferno-distributør eller besøg www.ferno.com.au.



Ferno Australia Pty Ltd 11
Johnstone Road, Brendale
Queensland 4500, Australien



Ferno Srl
via B. Zallone, n. 26,
40066 Pieve di Cento, Bologna, Italien
+ 35 051 6860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleckheaton
West Yorkshire BD19 4T, UK
+ 44 1274 851999



1 - SIKKERHEDSINFORMATION

1.1 Advarsel

Advarselsmeddelelser angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i personskade eller død.

 **ADVARSEL**

Benremmene er ikke designet eller klassificeret til at tage hele patientens vægt. Brug ikke gangbæltet som løftesele.

1.2 Meddelelse

Meddelelser understreger vigtig, men ikke fare-relateret information. Manglende overholdelse af meddelelser kan resultere i produkt- eller ejendomsskade.

VARSEL

1.3 Tip


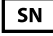










Tips giver anbefalinger til lettere brug af produktet.

T

Tip


1.5 Symbolordliste

De nedenfor definerede symboler bruges på gangbæltet og/eller i denne vejledning.

Symbol	Definition
	Produktkode
	Serienummer
	Batchnummer
	Fremstillingsdato
	Dato for pensionering/udløb
	Fabrikant
	I overensstemmelse med EU-standarder
	Overholder britiske standarder
	Autoriseret repræsentant Det Europæiske Fællesskab
	Autoriseret repræsentant Storbritannien
	Medicinsk udstyr
	Læs og gem brugervejledningen

1.6 Produktidentifikationsmærke

Produktidentifikationsetiketten indeholder vigtige oplysninger om produktet, herunder serienummer, fremstillingsdato og tilbagetrækning.

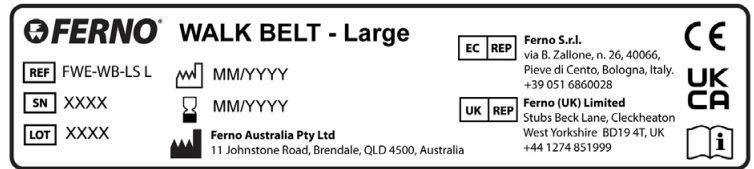

2 - OM GANGBÆLLET

Ferno Walk-bæltet er designet til paramedicinere og nødhjælpspersonale til at hjælpe patienter, mens de går.

Ferno Walk Belt fastgøres omkring en patients talje og er udstyret med otte håndtag – fire vandrette og fire lodrette håndtag – samt to benstropper, der er designet til at styrke Walk Belt, når det bruges til at stabilisere ustabile patienter. Gangbæltet reducerer væsentligt den indsats, som operatøren kræver for at hjælpe en patient, mens han går. Ferno Walk Belt kan maskinvaskes og genbruges gentagne gange.

PRODUKTDESIGNATION:	Stabilitetshjælp. Ikke til faldsikring fra højden.
GENEREL BRUG:	Forbedrer plejepersonalets evne til at give patienter stabilitet, mens de går
STØRRELSE Taljeomkreds:	FWE-WB-LS (Standard) 150 cm / FWE-WB-LS L (stor) 180cm



3 - TILPASNING OG BRUG AF GÅREBÆLLET


Montering og brug af gangbæltet

1. Frigør taljebæltespændet, og vikl gangbæltet rundt om patientens talje. Klem spændet sammen, og juster bæltetstroppen yderligere, så gåbæltet passer tæt mod patientens krop.

Tip

Forindstil gangbæltet

For at spare tid og reducere besværet for patienten, estimer patientens taljestørrelse og forhåndstilpass gangbæltet, før bæltet sættes på patienten.

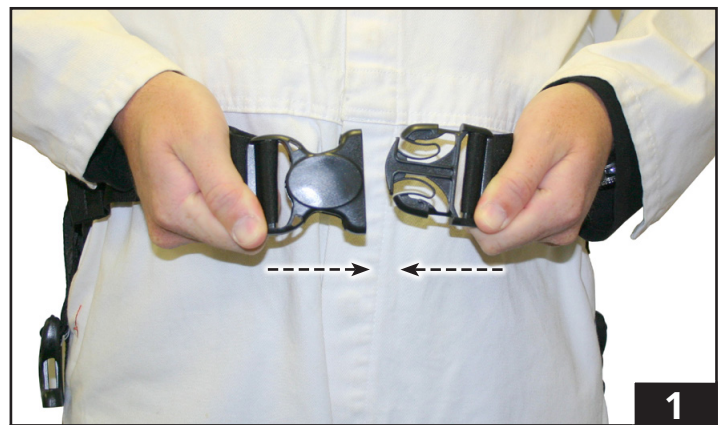

2. Frigør venstre benstropsspænde. Vikl den lange venstre benstrop om bagsiden af venstre ben til forsiden af benet via lyskeområdet, og tilslut spændet igen (figur 2 og 3). Juster stropper, hvis det kræves, for en tætsiddende og behagelig pasform.
3. Gentaq trin 2 med højre benstrop.
4. Når gangbæltet er sikkert fastgjort til patienten, kan operatøren bruge et hvilket som helst af de lodrette eller vandrette håndtag (figur 4 og 5) til at hjælpe patienten under gang.

VARSEL

Benstropperne skal monteres på patienten, hvis patienten skal flyttes fra enten stående til siddende stilling eller omvendt. Benstropperne er designet til at støtte patienten under disse manøvrer og holder gangbæltet i sin oprindelige position.

⚠ ADVARSEL

Benremmene er ikke designet eller klassificeret til at tage hele patientens vægt. Brug ikke gangbæltet som løftesele.

Inspektioner

Undersøg gangbæltet for at sikre, at det er egnet til brug, før det gemmes væk. En inspektionscheckliste er tilvejebragt som vejledning. Henvi alle tegn på forringelse til en kompetent eller udpeget person for at træffe afgørelse om produktets sikkerhed og brugbarhed.

CHECKLISTE FOR INSPEKTION AF GÅREM

WEBBING	Flosser, snit eller rifter
	Skader på grund af varme, ætsende eller opløsningsmidler
	Forringelse på grund af råd, meldug eller ultraviolet eksponering
SYNING	Knækkede, klippede eller slidte sømme
SPÆNDER & JUSTERE	Spænderne er sikkert syet til Walk Belt-båndet
	Quick Connect-spænder griber positivt ind, når de er tilsluttet
	Quick Connect Buckle-udløsningsmekanismen fungerer problemfrit, når den er aktiveret

Rengøring

Dette produkt bør rengøres regelmæssigt for at opretholde dets sikkerhed og serviceevne.

1. Børst løst snavs af.
2. Spray på en rengøringsopløsning. Brug ikke opløsninger, der indeholder blegemiddel, phenoler, iodider eller petroleum.
3. Brug en blød børste til at rengøre.
4. Lad rengøringsopløsningen trænge ind i båndet.
5. Hånd- eller maskinvask op til 40° Celsius.
6. Lufttør i et godt ventileret område, væk fra direkte sollys.

Opbevaring

Opbevar produktet væk fra direkte sollys, meget støv og fugt og ætsende atmosfærer.

