

Model S-265 Scoop

Model S-265 Scoop bære er en akutpatienthåndteringsenhed. Den er designet til at hjælpe med at forflytte en patient, når plads er begrænset, eller når patienten skal flyttes med lille ændring af kropspositionen. Betjen båret i henhold til lovene og protokollerne i det land, hvor den bruges. Kontakt de relevante myndigheder for at få oplysninger om love og protokoller, og løs eventuelle spørgsmål, inden du bruger båret sammen med en patient.

Båret er beregnet til professionel brug af mindst to uddannede operatører.

Bårerammen er konstrueret i to halvdele, der frakobles, skubbes under patienten, og gentag derefter for at løfte patienten. Båret kan også bruges i "V" -form, når den kun er frakoblet i fodenden.

Andre funktioner inkluderer en teleskopfodsektion med låsning positioner til længdejustering, tre håndtag på hver side af hovedrammen og skjulte hængsler, der gør det muligt for båret at folde sig sammen til opbevaring.

Model S-265 båret er udstyret med et sæt med tre patientbegrænsninger.



Læs denne manual og opbevar til fremtidig reference



Produktspecifikationer

Længde åben:	1660 mm
Længde max:	2013 mm
Længde foldet:	1200 mm
Bredde:	422 mm
Åben højde:	670 mm
Højde foldet:	90 mm
Enhedsvægt:	9,75 kg
Bæreevne:	159 kg



Oktober 2021, ver. 09

Pub. Nr. 50-8112-001_09



Fabrikant:

Ferno Slovakia s.r.o.

913 07 Bosaca 893 Slovakia



Tlf .: +421 (0) 32 7708010, sales@ferno.sk

1. Justering af bårens længde

Juster bårens længde til patientens højde, inden halvdelene frakobles. Dette sikrer lige justering til begge halvdele.


FOR AT FORLÆNGE ELLER FORKORTE BÅREN

1. Flyt låsestifthåndtaget på hver side af rammen til ulåst position (Figur 1) Bemærk: Når båren ligger med forsiden opad på en plan overflade, er den låste position "ned" og den ulåste position er "op" (Figur 1)
2. Træk fodsektionen udad til den ønskede længde, og stop i nærheden af en af låsepositionerne placeret ved hullerne langs fodsektionens ramme
3. Sæt begge låsestifter i låst position (Figur 1)
4. Skub eller træk fodsektionen lidt, indtil den låser på plads
5. Sørg for, at begge sider er sikkert låst

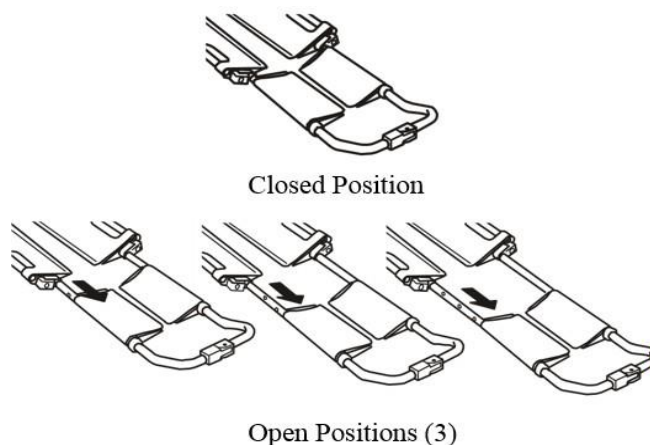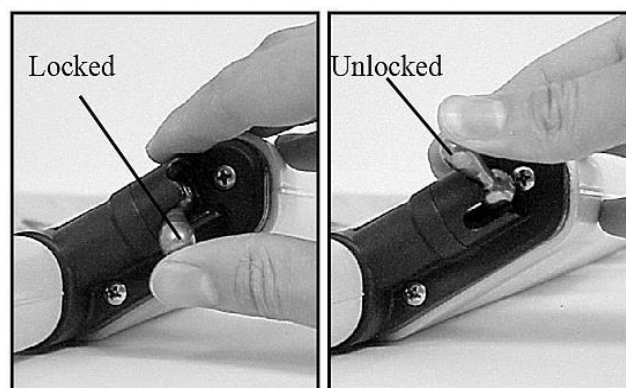


2. Anvendelse af båren

For at adskille bårens halvdele skal du bruge tommelfingrene til at trykke på Twin Safety Lock-grebene på hver enkelte kobling og trække koblingshalvdelene væk fra hinanden.

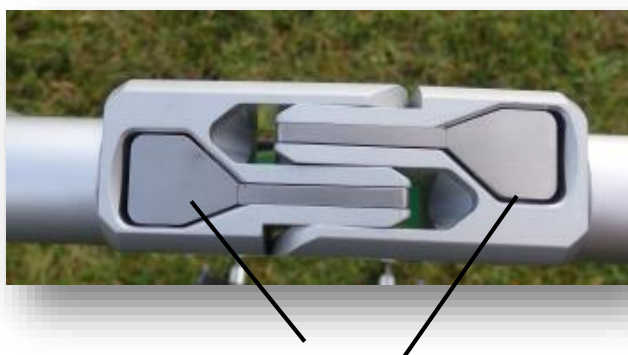

Dobbelt sikkerhedslåsehåndtag

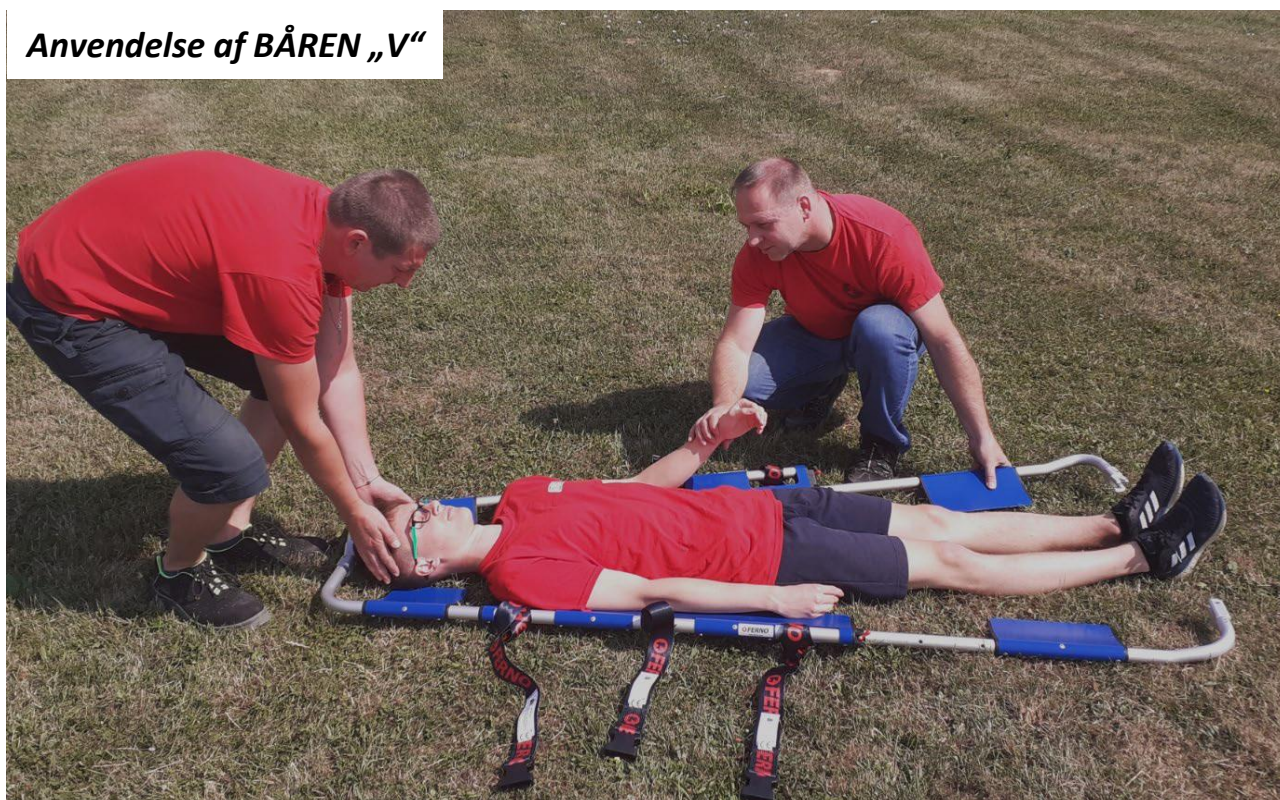

Anvendelse af BÅREN**Anvendelse af BÅREN „V“**

Bærer BÅREN**3. ANVENDELSE AF BÅREN I ET "V"**

Fold båren ud, hvis den er foldet til opbevaring, og juster længden (se B Justering af bårens længde)

1. Løsn seleanordningerne (hvis de opbevares på båre)
2. Åbn kun fodkoblingen.
3. Træk bårens fod og halvdele fra hinanden for at danne en "V" -form.
4. Placer båren med patientens hoved ved bunden af „V“ (figur 6)
5. Brug lokalt godkendte EMS-procedurer til at arbejde båren indad og under patienten. Arbejd fra hoved til fod, indtil koblingshalvdelene i fodenden mødes.


For at undgå at klemme eller trække i patientens hud, hår eller tøj, skal du være forsigtig, mens bårens halvdele arbejdes på plads under patienten.

4. MONTERING AF SELER


Model S-265 Scoop båre indeholder et sæt med tre to-delte seler.

Sådan fastgøres en todelt seleanordning:

1. Spænd seleanordningen og adskil den i to dele.
2. Før den bøjede ende af en seledel opad gennem en håndtagsåbning på bårerammen.
3. Hold løkken åben og træk spændet til fastspænding gennem løkken
4. Træk remmen gennem løkken, indtil løkken sidder tæt på bårerammen.
5. Bekræft, at alle seleanordninger er forsvarligt fastgjort

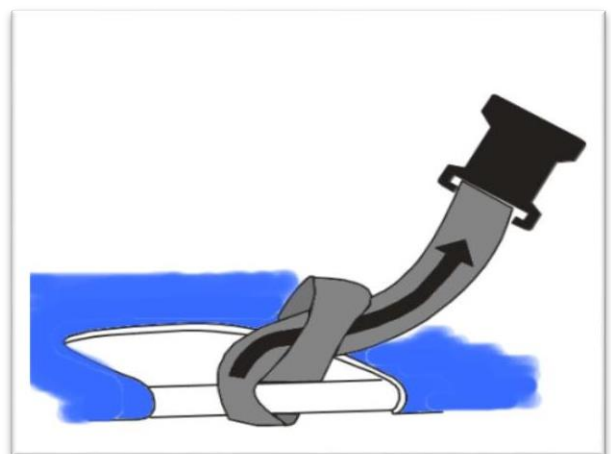

5. BRUG AF YDERLIGERE HJÆLP

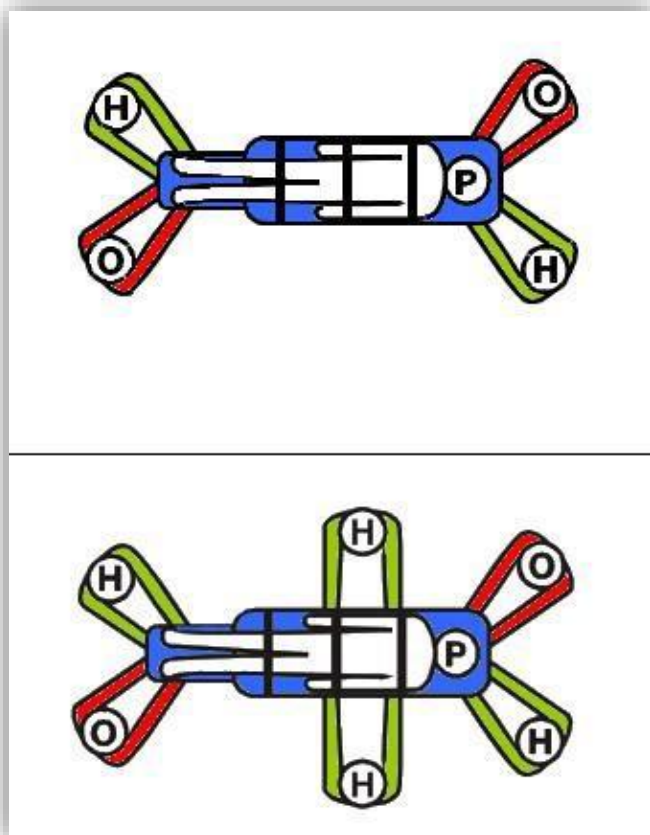


O-operatorør H-hjælper P-patient


6. OPBEVARING AF BÅREN

Fold båren, hvis den er foldet til opbevaring, og juster længden (se B Justering af bårens længde)

1. Lås låsehåndtagene på begge sider af båren op.
2. Forlæng fodsektionen ved at trække den ud, indtil hængslerne er helt synlige.
3. Løft fodsektionen og fold den over på torsopanelet

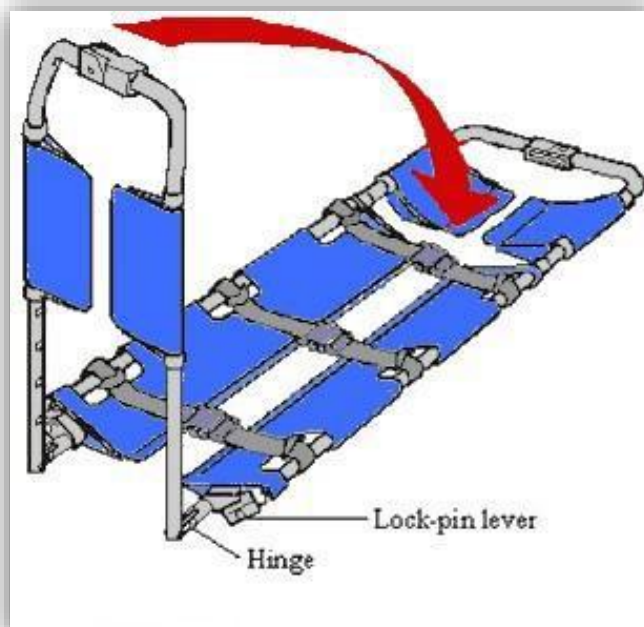

7. BÅREKOMPONENTER

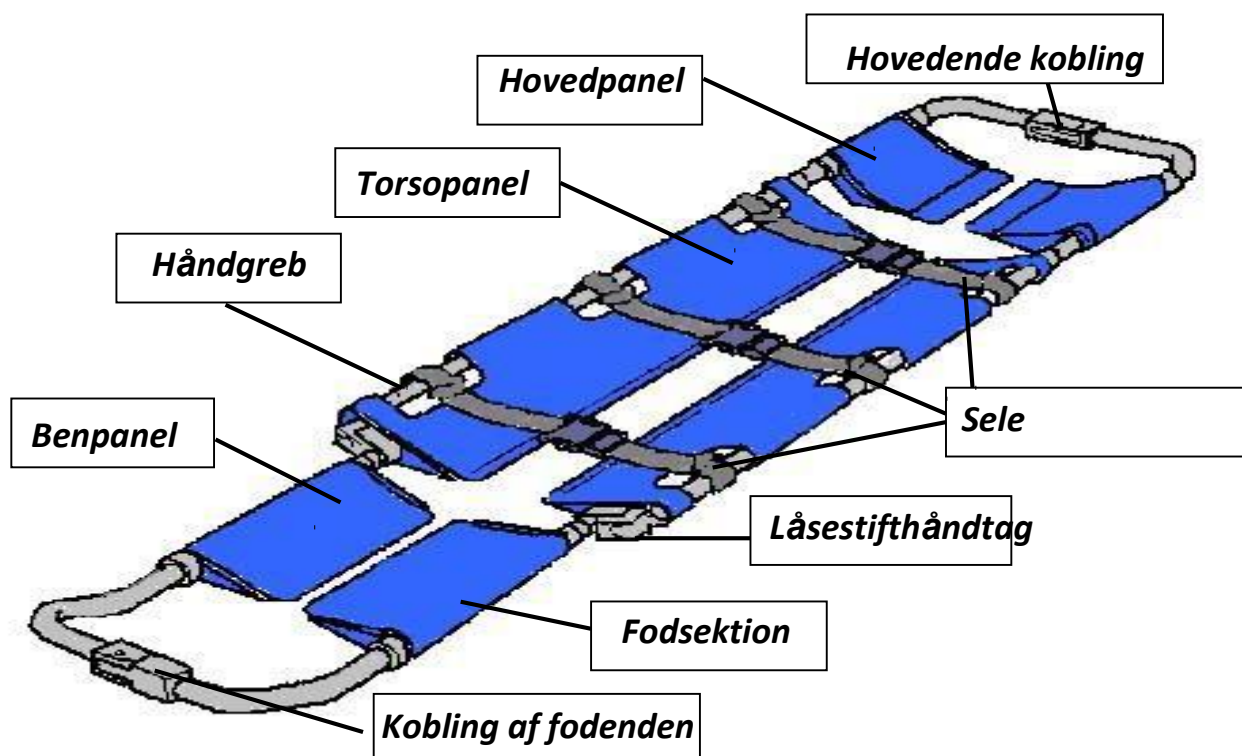

8. Smøring af båren

- Hvidt lithiumfedt
- SAE 30-vægt olie
- Teflon-smøremiddel med tør belægning




8. Garanti og service

Standard vilkår og betingelser gælder for alt salg. En kopi er tilgængelig på anmodning. Disse indeholder fulde detaljer om garantibetingelser og begrænser ikke kundens lovbestemte rettigheder.

Kontakt din lokale distributør for service, vedligeholdelse og spørgsmål vedrørende dette eller ethvert andet produkt.

CE-mærket på dette produkt demonstrerer overensstemmelse med kravene i EF-direktiv MDR 745/2017 og EN 1865-1 for medicinsk udstyr.

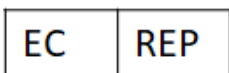

Ferno Washington Italia Srl via
B.Zallone, n26, 40066 Pieve di
Cento, Bologna, Italien
+39.051.6860028



ADVARSEL

FOR SERVICE OG REPARATION
Henvis til din salgsagent

Forkert brug af båren kan forårsage personskade. Brug kun båren til det formål, der er beskrevet i denne manual.

Utrænede operatører kan forårsage personskade eller blive såret. Tillad kun uddannet personale at betjene båren.

Forkert betjening kan medføre personskade. Betjen kun båren som vist i denne vejledning.

En patient uden opsyn kan blive såret. Bliv hele tiden hos patienten.

En ikke fastspændt patient kan falde af båren og blive såret. Brug seler til at fastspænde patienten på båren.

Uddannede hjælpere kan forårsage personskade eller blive såret. Betjen og bevar kontrol over båren og diriger hjælpere.