



PATIENTHÅNDBTERING

Ergonomi

Patienthåndtering udgør Ferno Norden's kerneforretning. I over 60 år har vi globalt set udviklet og produceret udstyr i tæt samarbejde med vores brugere.

Ambulancebårer

En ambulancebære er central i al ambulancebehandling. Et redskab, der gør hverdagen lettere for ambulancepersonalet. Sikkerhed, ergonomi, hygiejne og fleksibilitet er vigtigt. Komfort, tryghed og behandlingsfunktioner såsom chock tilstand er vigtige for patienten. Alt fra nyfødte til bariatriske patienter bør kunne håndteres på en værdig og sikker måde. Hvilken bæremodel passer til din organisation?

Bærestole/trappestole

I dag har stort set alle ambulanceoperatører en bærestol/trappestol i deres køretøjer. Udviklingen fortsætter og vi ser en stigning i antal. Foldbare, udtrækelige håndtag, sidearm læn, elektriske bæltter, aftagelige bæltter, opbevaring, vægt - ja, der er mange spørgsmål og muligheder. Vi tilbyder flere forskellige modeller, hvilken version passer til din arbejdsituation?

Akutmadrasser

En akutmadras (transportmadras) er ikke bare en almindelig madras, men en separat enhed defineret i henhold til EN-1865 til ambulancebehandling. Hygiejnisk og holdbar med flere håndtag til løft, den skal bære mindst 150 kilo, have komfort på patientsiden og stiv rygside til forflytning. Den skal håndtere temperaturer fra -30°C til +70°C og være røntgengennemtrængelig. Vores akutmadrasser har også memory skum for maksimal komfort, og bruges dagligt sammen med vores tilbehør Step by Step selen.

Ergonomisk tilbehør

Patienthåndtering kan virke simpel, men det er en daglig opgave, der skal løses så ergonomisk, hygiejnisk og fleksibelt som muligt. Arbejdet omkring en ambulancebære er aldrig bedre end de hjælpemidler, der bruges, og i dag tager vi oftere patienten til båret i stedet for båret til patienten. Hvilket tilbehør passer til dig?

Specialtransporter

Kuvøse, børnetransport, IVA-transport, transport af patienter med nedsat mobilitet – ja, der er mange udfordringer i ambulancedriften. Kig gerne på vores løsninger, mangler du noget?

Heavy duty/bariatriske transportere


Overvægtige patienter er nu en del af dagligdagen, når det gælder præhospital håndtering. Vi har et komplet program til at kunne løse opgaven på en ergonomisk og sikker måde. Hvordan løser I transporten af bariatriske patienter?

Ferno VIPER POWER + Ferno VLS 320 kg

Ferno VIPER er en elektrisk bæreløsning, der kombinerer europæisk design med globale funktioner. Brugervenlighed, pålidelighed og funktion gør Ferno VIPER til en nordisk favorit, når det gælder elektriske bårer. Med en bæreevne på 320 kg i kombination med Ferno's sidearm læn får du en bære, der klarer selv de lidt større patienter. Ferno VIPER er enkel at lære, nem at håndtere og ind- og udlade fra ambulancen. På trods af sin høje lastekapacitet kan den nemt manøvreres på trange steder. VIPER er en robust bære, der står/ruller stabilt selv i sin højeste position.

Ferno VLS er et lethåndterligt og fleksibelt system, der giver dig mulighed for at indlade båret fra forskellige vinkler og højder på mindre end 20 sekunder. VLS vil automatisk centrere båret før indladning. VLS er et af markedets letteste systemer, hvilket giver en lavere totalvægt i ambulancen.

Varenummer	F1000
Højde	38-130 cm
Bredde	60 cm
Længde	160-200 cm
Vægt	75 kg
Maks kapacitet	320 kg
Certificering	CE, EN1789, EN1865

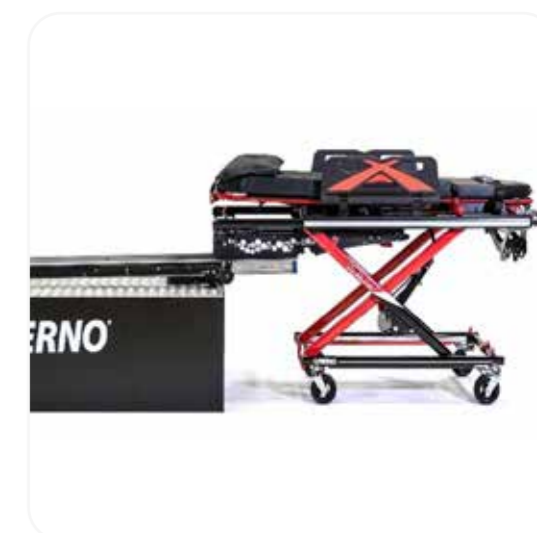

Ferno iNjX ambulancebære 318 kg

iNjX ambulancebåren er formentlig verdens mest avancerede elektriske bære, samtidig med at den er den nemmeste at håndtere. Der kræves ingen styrke til de forskellige trin som at hæve/sænke båret eller ind-og udlade fra ambulancen. iNjX båret er designet på baggrund af omfattende feedback fra ambulancetjenester for at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden i den daglige drift rundt om i verden.

iNjX ambulancebåren har al teknologien i båret, hvilket giver dig tilpasningsmuligheder ingen anden ambulancebære kan håndtere. Du løser transport på rulletrapper, tærskler og andre forhindringer med et enkelt tryk på en knap.

Varenummer	F8000
Højde	35,6-124,5 cm
Bredde	59,7 cm
Længde	159,4-204,5 cm
Vægt	92 kg
Maks kapacitet	318 kg
Certificering	CE, EN1789, EN1865





Ferno POWERX™ 400 kg

PowerX er vores bedste løsning indenfor det vi kalder "X-Frame" eller X-ramme, som er et kraftfuldt bårer system med op til 400 kilos bæreevne! PowerX er udviklet til køretøjer med løfterampe/bagklapslift. De 4 "push poles" gør båreren meget nem at manøvrere og giver en ergonomisk fordelagtig håndtering. PowerX er designet hele vejen igennem med god hygiejne for øje. Båreren har rene linjer, der er nemme at tørre af, og inkluderer biosafe patientseler og biosafe madras (antibakteriel overflade).

PowerX er en favorit, når det kommer til specialtransporter med kuvøser, intensivpatienter og med bariatriske patienter.

Varenummer	FGB3000
Højde	48-88 cm
Bredde	57 cm
Længde	145-193 cm
Vægt	78 kg
Maks kapacitet	400 kg minimum pos./350 kg
Certificering	CE, EN1789, EN1865

Ferno F3 ambulancebåre 250 kg

Ferno F3 ambulancebåren er en robust og praktisk bære designet til nem håndtering. Overskuelige funktioner med enkle håndtag gør, at du hurtigt lærer at håndtere båreren. Ferno F3 kan justeres til flere forskellige højder for enkel ind- og udladning. De store 200 mm hjul får dig fremad selv på ujævnt underlag, alle fire hjul kan kobles fra for at gøre det nemmere at dreje båreren 360 grader på trange steder. To af hjulene kan låses i retning, så båreren kan rulles under kontrol af én person. Ferno F3 kan klare en belastning på 250 kg.

Chock tilstand, knæposition og et 8-trins ryglæn gør, at båreren kan tilpasses efter behov. Robuste sidearmklæn, der nemt kan foldes op eller ned og dropholder er inkluderede funktioner.

Ferno F3 ambulancebåren leveres komplet med bælter og en sort madras. Ekstraudstyr: F520090 Bårelås til FERNO F3


Varenummer	F521031
Højde	32-86 cm
Bredde	56 cm
Længde	195 cm
Vægt	45 kg
Lastkapacitet	250 kg
Certificering	CE, EN1789, EN1865

Transcend™ Traxx manuel 250 kg

Vores helt nye Transcend™ Traxx giver operatører og patienter tryk og sikker transport ned ad trapper. Transcend™ Traxx kan håndtere patientbelastninger på op til 250 kg. Glatte og store drejelige forhjul på 12x3 cm og ekstra store 20x4 cm baghjul med integrerede støddabsorberende dæk, som du nemt kan navigere i ujævnt terræn.

Transcend™ Traxx fylder lidt, når den er foldet, og ingen dele stikker ud, som kan sætte sig fast ved ind- og udtagning (Mål foldet: 91,2 x 50,7 x 20 cm). I sammenfoldet stilling er stolen låst til at kunne håndteres uden at den folder sig ud. De udtrækkelige baghåndtag har en unik vinkel for at give en bedre ergonomisk position ved håndtering og bæring af stolen. Trappestolen er manuel og glider let ned ad trapper, så du ikke skal bære patienten.

Varenummer	F0731402
Højde	151,8/ 90,8 cm
Bredde	50,5 cm
Dybde	76/135 cm
Vægt	14,7 kg
Maks kapacitet	250 kg
Certificering	CE, EN1865

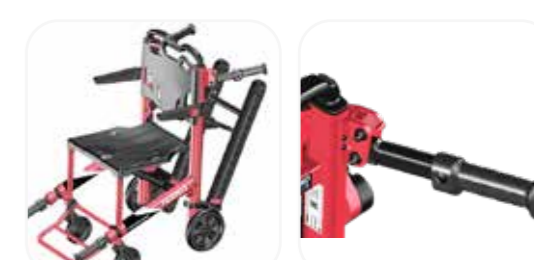


Transcend™ PowerTraxx® 250 kg

Vores helt nye Transcend™ PowerTraxx® giver operatører og patienter maksimal sikkerhed og kraft ved transport op eller ned ad trapper. Transcend™ PowerTraxx elektrisk styrede motor, med direkte drev transmission, driver bælterne og håndterer patientbelastninger på op til 250 kg med lethed op og ned ad trapper. Batteriet har en ekstrem kapacitet og kan klare 24-timers vagter uden problemer (40 trapper op og ned i gennemsnit). Glatte og store 12x3 cm drejelige forhjul og ekstra store 20x4 cm baghjul med integrerede støddabsorberende dæk, som du nemt navigerer i ujævnt terræn.

Transcend™ PowerTraxx® fylder lidt, når den er foldet, og ingen dele stikker ud, som kan sætte sig fast ved ind- og udtagning (Mål foldet: 91,2 x 50,7 x 20 cm). I sammenklappet stilling er stolen låst, så den nemt kan håndteres, uden at den slår sig selv ud.

Varenummer	F0731403
Højde	151,8/ 90,8 cm
Bredde	50,5 cm
Dybde	76 /135 cm
Vægt	23.3 kg
Maks kapacitet	250 kg
Certificering	CE, EN1865

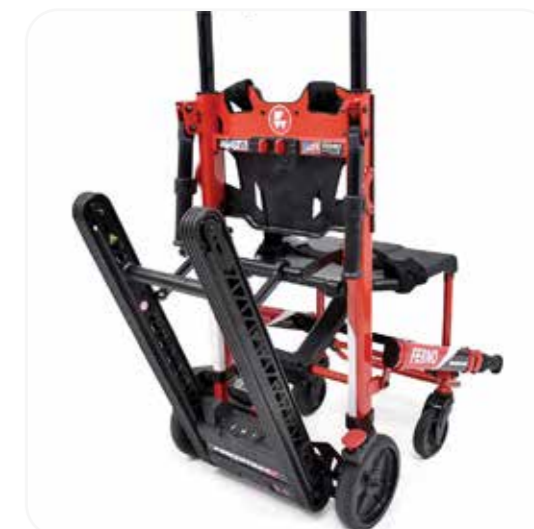

Bærestol/trappestol

FAST-stol manuel 250 kg

FAST er den mest fleksible serie af stole til nem og ergonomisk patienthåndtering. FAST har en stærk konstruktion og kan belastes med op til 250 kg. Denne stol med manuelle bæltter glider ned ad trapper og eliminerer tunge løft. Stolen er udstyret med store drejelige hjul foran og faste baghjul, som gør den let at manøvrere i alle miljøer. For den bedste ergonomi kan FAST tilpasses højden på forskellige operatører. Det hygiejniske vinylsæde er hævet i ryggen, hvilket gør det behageligt at sidde på. Den manuelle stol fås i to modeller:

F05610 Faste bæltter

F05620 Aftagelige bæltter. Aftagelige bæltter kan være velegnede, hvis du nogle gange skal bære stolen op ad trapper og gerne vil kunne reducere vægten. Det crashtestede vægbeslag fås som tilbehør til sikker montering af stolen i et køretøj (varenummer F05690).

Fås også i udgaver med ryg og sæde i hård plast.

Varenummer	F05610/F05620
Højde	100-158 cm
Bredde	54,5 cm
Længde	69,5 cm
Vægt	15 kg/11,2 kg
Maks kapacitet	250 kg
Certificering	CE, EN1865

FAST-stol PowerTraxx 227 kg

FAST systemet er en ny og fleksibel stoleløsning, bærestol og powerstol med motor i ét. Med motoriserede bæltter (PowerTraxx) kan man nemt transportere patienter op og ned ad trapper.

Ender du i situationer, hvor patienten skal bæres, kan du hurtigt og nemt afmontere bæltterne med motor, så du har en lettere bærestol på plads. Dette kan også være en fordel ved ind- og udladning fra køretøjer. FAST stolen har en stærk konstruktion og kan belastes med op til 227 kg. Stolen er nem at manøvrere i alle miljøer. For den bedste ergonomi kan FAST tilpasses højden på forskellige operatører. Det hygiejniske vinylsæde er hævet bag ryggen, hvilket gør det behageligt at sidde på.

Det crashtestede vægbeslag fås som tilbehør til sikker montering af stolen i et køretøj (varenummer F05690).

Fås også i udgaver med ryg og sæde i hård plast.

Varenummer	F05630
Højde	100-158 cm
Bredde	54,5 cm
Længde	69,5 cm
Vægt	25 kg
Maks kapacitet	227 kg
Certificering	CE, EN1865

Compact 2 Track 200 kg

Ferno's Compact 2 Track kombinerer det bedste fra to verdener.

Compact 2 Track er en videreudvikling af vores meget populære bærestol Compact 2. For at reducere bæreevnen til et minimum klikker du blot på bæltterne, og så har du en trappestol, der nemt glider ned ad trappen.

Den store fordel du opnår er, at du kan vælge ud fra din situation, om du vil have en bærestol eller en trappestol. Håndtaget giver dig bedre ergonomi og du får lidt afstand til patientens hoved.

På håndtaget er en behagelig hovedpude til patienten, der forhindrer hovedet i at falde bagover. Her har du en perfekt bærestol, der er fleksibel og pålidelig i alle situationer.

Varenummer	FGB071481450
Højde	106-139 cm
Bredde	45 cm
Længde	60 cm
Vægt	15 kg
Maks kapacitet	200 kg
Certificering	CE, EN1865



Ferno S242 bærestol 159 kg

S242 er en meget praktisk, enkel og populær bærestol. Teleskopiske håndtag i fodenden og dobbelte håndtag på bagsiden giver flere muligheder ved svære løft.

Dette er en mere enkel model uden bæltter til dem, der ønsker en simpel og praktisk bærestol til patientforflytning.

Varenummer	S242
Højde	91,5 cm
Bredde	52 cm
Længde	121 cm
Vægt	10 kg
Maks kapacitet	159 kg
Certificering	CE, EN1865

Bærestol/trappestol

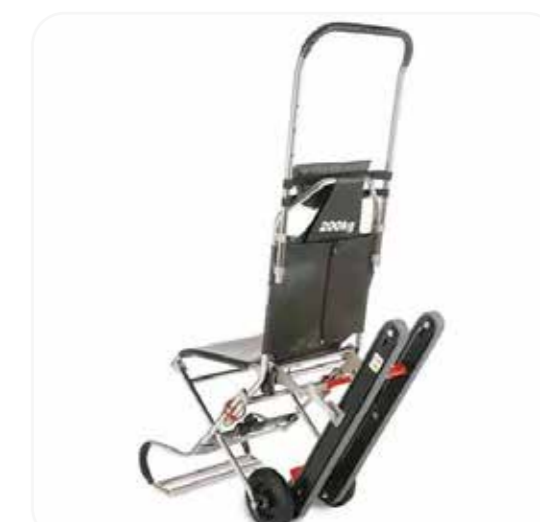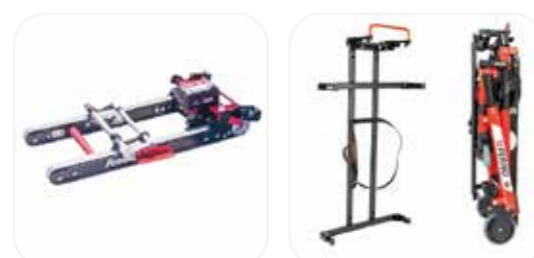

Akutmadras UNI Standard 250 kg

UNI akutmadras er en sikker, hygiejnisk og ergonomisk universalmadras, der passer til de fleste ambulancebårer på markedet. UNI akutmadras er testet og udviklet sammen med nordisk ambulancepersonale med høje krav til hygiejne, sikkerhed, ergonomi og komfort. Der stilles højere krav til akutmadrasser end til en "normal" madras, når det gælder funktion og hygiejne.

- Pudens kan foldes væk, hvis du ønsker en bedre vinkel under intubation.
- Store huller for nemt at kunne føre bårer ind og ud ved forflytning.
- Bedre komfort, 15 mm sensus memory skum og 45 mm komfortskum.
- Indersiden af akutmadrassen har en skjult V-formation, der giver ekstra støtte og komfort til patienten.
- Testet og udviklet til at fungere sammen med Step by Step selesættet.
- V-formet fodende, der passer til alle bårer.

Varenummer	GE24271030000
Højde	6 cm
Bredde	50 cm
Længde	185 cm
Vægt	4,7 kg
Maks kapacitet	250 kg
Certificering	CE, EN1865, MDR2017/745

Akutmadras UNI Komfort 250 kg

UNI akutmadras komfort har ekstra skum og komfort. UNI akutmadras er en sikker, hygiejnisk og ergonomisk universalmadras, der passer til de fleste ambulancebårer på markedet. UNI akutmadras er testet og udviklet sammen med nordisk ambulancepersonale med høje krav til hygiejne, sikkerhed, ergonomi og komfort. Der stilles højere krav til akutmadrasser end til en "normal" madras, når det gælder til funktion og hygiejne.

- Pudens kan foldes væk, hvis du ønsker en bedre vinkel under intubation.
- Store huller for nemt at kunne føre bårer ind og ud ved forflytning.
- Bedre komfort, 25 mm sensus memory skum og 65 mm komfortskum.
- Indersiden af akutmadrassen har en skjult V-formation, der giver ekstra støtte og komfort til patienten.
- Testet og udviklet til at fungere sammen med Step by Step selesættet.
- V-formet fodende, der passer til alle bårer.

Varenummer	GE24271030003
Højde	10 cm
Bredde	50 cm
Længde	185 cm
Vægt	5,2 kg
Maks kapacitet	250 kg
Certificering	CE, EN1865, MDR2017/745

EasyGlide Glidebræt 60 cm

EasyGlide er en genial lille opfindelse. Den hjælper til under forflytninger fra kørestol til seng, toilet, bilsæde og mange andre steder, hvor der er behov for at sidde ned for en stund. EasyGlide er særdeles velegnet til at udjævne højdeforskelle eller til at bygge bro over kortere afstande. Kanterne på glidebrættet kan bøjes og er derfor nemme at placere foran kørestolens hjul som beskyttelse mod snavs og andet. Den glatte top gør brættet nemt at flytte rundt, mens anti-slip tapen i bunden forhindrer det i at glide under forflytning.

Varenummer	SWR131641
Højde	0,6 cm
Bredde	33 cm
Længde	60 cm
Vægt	1 kg
Maks kapacitet	136 kg
Certificering	CE

Glidebræt 114 cm Ferno

Glidebrættet er en fantastisk opfindelse, der gør en stor forskel i patienthåndtering og forflytning mellem forskellige enheder såsom kørestole, senge og bårer. Det glatte materiale gør det lettere at forflytte en patient, og brættet er også velegnet til at udjævne højdeforskelle eller til at bygge bro over kortere afstande.

Dette Ferno glidebræt er større end vores andre glidebræt og er ideelt, når du skal bruge et langt glidebræt, eller når du skal flytte lidt større patienter. Det er meget praktisk at bruge to glidebræt, når man forflytter en liggende patient. Et under bækkenet og et under skulderen. Med seks forskellige håndtag får du nemt greb om glidebrættet.

Brættet er en favorit, når bariatriske patienter skal håndteres.

Varenummer	F673
Højde	0,6 cm
Bredde	46 cm
Længde	114 cm
Vægt	2 kg
Certificering	CE



Ergonomiske hjælpemidler

Evakueringssele Step by Step 250 kg

Step by Step selesættet er et unikt ergonomisk hjælpemiddel, som i kombination med en akut- eller vakuummadrass giver dig en tryk, sikker og ergonomisk måde at forflytte patienter på. Selen optager kun lidt plads og har en lav vægt. Step by Step kan benyttes på alle vores akutmadrasser og vakuummadrasser. En pose til fødderne forhindrer patienten i at glide ud. Remmene er testet til en belastning på op til 250 kg. Overskuelig og letforståelig brugermanual.

Forstærkede stropper med justerbare hoved- og fodendehåndtag og fire patientseler til fiksering.

Dette er en **NY forbedret version**, der giver øget fleksibilitet for både personale og patient. Nu kan du blandt andet justere hoved- og fodrem til at fungere bedre, baseret på operatørens forskellige højder. Fire patientseler medfølger efter ønske fra vores brugere.

Varenummer GE15000000117

Højde 15 cm

Bredde 20 cm

Længde 30 cm

Vægt 1,3 kg

Maks kapacitet 250 kg

Certificering CE

Evakueringsmadrass Minitranz 250 kg

MINITRANZ er det ideelle hjælpemiddel til forflytning af patienter, især i trange rum, som kan være svære at tilgå.

Den passer under eller oven på en akutmadrass, og er et godt ergonomisk redskab til at forbedre arbejdsgangen i forskellige situationer. Undersiden er blevet forstærket med en "glideflade" som på vores akutmadrasser!

Den sorte model er bredere for bedre ergonomi og fleksibilitet samt for at imødekomme forflytninger til og fra redningsbåre.

Varenummer GE70050

Højde 1,5 cm

Bredde 76 cm

Længde 136 cm

Vægt 1,8 kg

Maks kapacitet 250 kg

Certificering CE

Ergonomiske hjælpemidler

Bæresele Easy Lift Shoulder

Easylift Shoulder er et hjælpemiddel udviklet til at aflaste hænder og arme, når man bærer en bære. Easylift er nem at bruge og har unikke funktioner, der gør dette til fremtidens bæresele.

Easylift har en friktionslås som dels giver et fast greb og samtidig giver dig mulighed for lynhurtigt at koble dig fra, hvis en uventet situation opstår. Benyttes af mange i ambulancetjenesten som en personlig sele til altid at være forberedt, hvis der er udsigt til tunge løft!

Varenummer GE15000000016

Vægt 0,4 kg

Ferno Easy Handle 250 kg

Ferno Easy Handle, den enkle løsning, der gør den store forskel. Med fokus på ergonomi er dette hjælpemiddel designet til brug ved løft af madrasser, minibåre, vakuummadrasser, scoopbåre mv. overalt, hvor du har brug for at nå lidt bedre og få et mere ergonomisk greb. Med Easy Handle er det muligt at foretage ergonomiske løft fra knæhøjde.





Kittet består af 4 løkker med ergonomiske håndtag, som leveres i en praktisk opbevaringspose.

Varenummer GE15000000034

Længde 40 cm

Vægt 0,45 kg

Maks kapacitet 250 kg

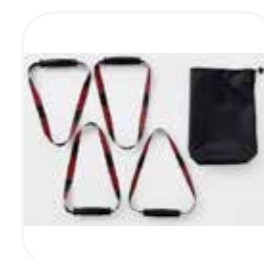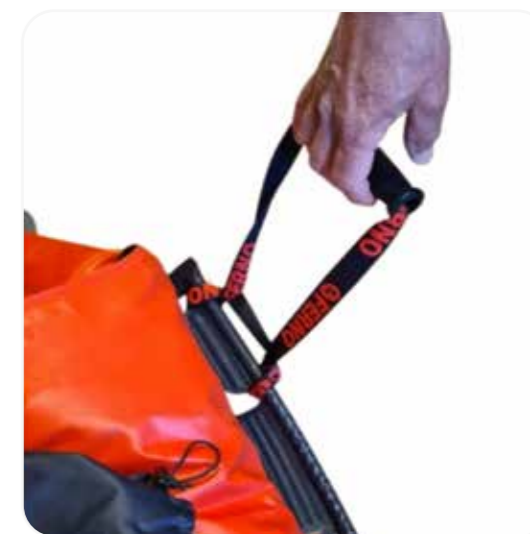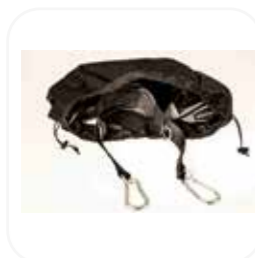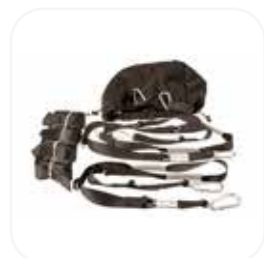

Ergonomiske hjælpemidler

Retmex® Rescue Standard 250 kg

Retmex® Rescue Stretcher Standard 250 kg er en praktisk redningsbåre, der optager meget lidt plads. For at sikre, at du kan klare selv de mest kritiske situationer, er redningsunderlaget designet i førsteklasses materiale, der tåler hårde belastninger og samtidig er nemt at holde rent. Med kompakt opbevaring og en vægt på 900 g er Retmex® Rescue Stretcher Standard 250 kg let og fleksibel uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed! Tæppet er nemt at have med ude i marken, i køretøjet eller i dit første-hjælps-kit.

Kan vaskes ved 60 grader C.
EN-ISO 13485:2016, EN-ISO 14971:2019
Ideel til situationer, hvor evakuering og løft forekommer.

Varenummer	5006063
Bredde	80 cm
Længde	205 cm
Vægt	0,9 kg
Maks kapacitet	250 kg
Certificering	CE

Retmex® Rescue Bariatric 385 kg

Retmex® Rescue Stretcher Bariatric 385 kg er en praktisk redningsbåre, der kun optager lidt plads. Dette er en fremragende redningsbåre, der kan håndtere alle situationer. Ideel til ambulancer og beredskabskøretøjer. Væskeafvisende overflade og komfortable håndtag alt sammen pakket i en praktisk taske. For at sikre, at du kan klare selv de mest kritiske situationer, er redningsbåren designet i førsteklasses materialer, der tåler hårde belastninger og samtidig er nemme at holde rene. Med en meget kompakt opbevaring og en vægt på 3 kg er Retmex® Rescue Stretcher Bariatric 385 kg let og fleksibel uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed!

Kan vaskes ved 60 grader C.
EN-ISO 13485:2016, EN-ISO 14971:2019
Ideel til situationer, hvor evakuering og løft forekommer.

Varenummer	5006062
Bredde	120 cm
Længde	220 cm
Vægt	3 kg
Maks kapacitet	385 kg
Certificering	CE

Ergonomiske hjælpemidler/hygiejne

Bælte til forflytning Ferno Walk belt

Ferno Walk Belt er et ergonomisk forflytningsbælte. Bæltet fastgøres til patienten og giver personalet mulighed for at yde stabil støtte, når en patient skal rejse sig, gå eller forflyttes. Der medfølger remme, som kan fikseres rundt om benene, så forflytningsbæltet ikke glider op under brug.

Med fire vandrette og fire lodrette håndtag er der flere muligheder for at få et godt greb. Bæltet kan maskinvaskes.

Varenummer	FWEWBLS
Bredde	15 cm
Længde	140 cm
Vægt	0,3 kg

Forflytningslagen, engangs 415 kg

Flexislide er et hygiejnisk, patientbundet forflytningshjælpemiddel til engangsbrug, ideelt til alle laterale patientforflytninger. Flexislide gør arbejdet lettere og reducerer risikoen for belastningsskader på ryg og skuldre hos sundhedspersonale. Lagenet kan håndtere op til 415 kg både under tørre og våde forhold.

Testet for brændbarhed i henhold til EN ISO12952-1:2010 og for fnug i henhold til BS EN 13795:2011+A1:2013.

Fås i to størrelser, standard (5006201) og bred (5006202).

Flexislide er et rigtig godt tilbehør til vores vakuummadrasser.

Varenummer	5006201/ 5006202
Højde	2 cm
Bredde	85/ 115 cm
Længde	195 cm
Vægt	450 g
Maks kapacitet	415 kg
Certificering	CE



Øvelse/børnesikkerhed



Øvelsesdragt bariatrisk patient

Denne øvelsesdragt i tre dele gør det nemt at øve sig i håndtering af bariatriske patienter. Da du selv har mulighed for at agere "patient", vil du opleve de udfordringer og begrænsninger, der kan være forbundet med at bevæge sig, sidde op eller udføre andre hverdagsbevægelser, der ellers kan tages for givet. I dit eget arbejdsmiljø kan du trygt øve dig i, hvad der virker, og hvad du måske kan gøre anderledes i håndteringen af en bariatrisk patient. Da den faktiske vægt på dragten ikke er så høj, kan du øve ergonomiske teknikker uden at overbelaste dig selv fysisk under træningen.

- Oplev selv de vanskeligheder, der kan være ved at tage tøj på.
- 3 dele: ben, arme og overkrop
- Bukser og sweater medfølger
- Kan maskinvaskes ved 30°C
- Materiale: 98% polyester 2% elasthan

Varenummer	5006065
Vægt	15 kg



NEO-Mate 2,3 til 6,4 kg

Neo-Mate Pediatric Restraint System er designet til pædiatriske patienter med en vægt på 2,3 til 6,4 kg.

Selen gør det muligt hurtigt og effektivt at fastspænde de mindste patienter sikkert til næsten enhver ambulancebåre uden at skulle købe ekstra udstyr eller specielle stole.

Neo-Mate er fuldt justerbar med et fempunktsselesystem, der sikkert holder patienten og giver komfortabel fastspænding under transport. Tre stropper fastgør nemt Neo-Mate til enhver ambulancebåre, og en Halo Pad holder barnets hoved stabilt.

Varenummer	5003050
Bredde	27 cm
Længde	53 cm
Vægt	1,18 kg
Vægtkapacitet	2,3-6,4 kg
Certificering	CE



Kangoofix 1,8 til 5 kg

Kangoofix er et helt unikt og gennemprøvet patenteret bæltssystem til at udføre sikre ambulancetransporter af nyfødte børn. Kangoofix er designet til at beskytte barn, forælder og personale. Alle skal kunne fastspændes sikkert i en ambulance. Kangoofix er testet dels gennem medicinske felttest og dynamiske crashtests (10 & 20G).

Benyttes hyppigt i dag som et godt supplement indenfor neonatal sundhedspleje, når stabile børn transporteres mellem hospitaler.

Til børn mellem 1,8-5 kg.

Varenummer	GE15271000820
Højde	5 cm
Bredde	23 cm
Længde	33 cm
Vægt	1 kg
Vægtkapacitet	1,8-5 kg
Certificering	CE, EN1789

Børnesikkerhed




Pedi-Mate Plus 4,5 til 45 kg

PediMate®Plus er en nyhed!

PediMate®Plus giver en sikker transport af de mindste børn og er designet til pædiatriske patienter på mellem 4,5 til 45 kg. En lethåndterlig sikkerhedssele til ambulancetransport.

Udstyret rulles hurtigt ud efter behov og fastgøres til ambulancebåren med tre stropper. Med en justerbar fempunktssele tilpasses udstyret nemt til barnets størrelse.

Varenummer	5003055
Bredde	48 cm
Længde	90 cm
Vægt	1,59 kg
Vægtkapacitet	4,5-45 kg
Certificering	CE

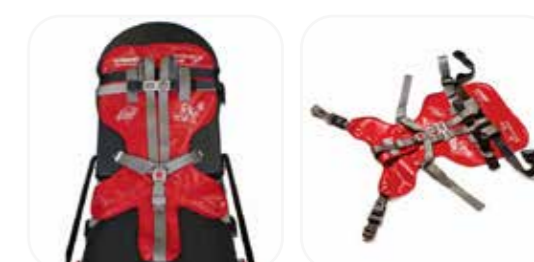

Specialtilbehør



UNI-ClipDoc System™ Incubator Interface LifePort/AeroSled

UNI-ClipDoc System™ blev udviklet for at skabe fleksibel patientforflytning mellem land- og lufttransport. Denne unikt konstruerede grænseflade gør det muligt at forflytte patientplatforme såsom LifePort, AeroSled og kuvøser direkte fra flyet til ambulancen. UNI-ClipDoc System™ spejler fly-/helikoptergulvet og giver en jævn og sikker patienthåndteringsproces.

Mellem luft og jord er FERNO's UNI-ClipDoc System™ løsningen. Hurtig og nem montering af den 2-delte konstruktion.

Pakkes nemt i bæretasker. Testet og godkendt i henhold til EN 1789.

Varenummer	FGB031379000
Højde	20,5 cm
Bredde	58,5 cm
Længde	195,5 cm
Vægt	32,3 kg
Maks kapacitet	Afgøres af bæremodel
Certificering	CE, EN1789


ITC Incubator Transport Interface

ITC (Incubator Transport Interface) grænsefladen er specielt designet til sikker transport af kuvøser på flere af Ferno's forskellige ambulancebåre. ITC-systemet består af en ramme og et sæt med seks lynkoblinger og 4 udtrækkelige håndtag.

ITC grænsefladen har 2 tværgående bjælker med 4 fikseringspunkter til kuvøsen. Når kuvøsen er forankret i ITC rammen i henhold til kuvøseproducentens retningslinjer, løftes den på plads og sikres i de 6 lynkoblinger på ambulancebåren for en sikker transport.

Testet og godkendt i henhold til EN 1789.

Varenummer	F7000-ITCHLINX
Højde	13,5 cm
Bredde	62 cm
Længde	120 cm
Vægt	10 kg
Maks kapacitet	140 kg
Certificering	CE, EN1789

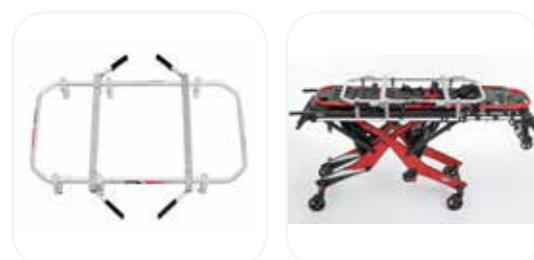

PacRac™+ Intraxx IVA-plattform 25 kg

PacRac+ IVA platformen er velegnet til ekstraudstyr under transport og kan håndtere op til i alt 25 kg. PacRac+ IVA platformen har Intraxx-profiler til nem og sikker hurtigkobling med Intraxx-beslaget, samt to integrerede dropstativer og sideporte, der kan åbnes, så patienter kan forflyttes fra seng til bære uden at fjerne PacRac+ fra båren.

PacRac+ IVA platformen kan foldes fladt til opbevaring i ambulancen. PacRac+ monteres til fodenden af båren på de fleste Ferno ambulancebåre. PacRac+ er fremstillet af pulverlakeret aluminium og er enkel, holdbar og nem at rengøre.

Sammenfoldet er målene: 12x53x56 cm.

Varenummer	F8034
Højde	56 cm
Bredde	53 cm
Dybde	42 cm
Vægt	7,2 kg
Maks kapacitet	25 kg
Certificering	CE, EN 1789

Easy Trans Heavy Duty 20 kg

Easy Trans IVA platformen er designet til at transportere alvorligt syge patienter på en sikker måde uden at flytte rundt på udstyret monteret i ambulancen. Patienten kan tilsluttes udstyret fra punkt A til punkt B. Platformen indstilles efter dit eget udstyr. Det eksterne udstyr som monteres på platformen må maksimalt veje 20 kg.

Platformen er fastgjort til fodenden af ambulancebåren.

Easytrans kan tilpasses til Allfabåren, Ferno Mondial og Stryker.

Varenummer	5009313
Højde	83 cm
Bredde	61 cm
Længde	64 cm
Vægt	9,7 kg
Maks kapacitet	20 kg eksternt udstyr
Certificering	CE, EN1789

Specialtilbehør



Specialtilbehør




Vakuumpude Motion Restriction Pillow

MRP er udviklet i samarbejde med ambulancetjenesten for at give en komfortabel, praktisk og hygiejnisk pude, som hvis det bliver nødvendigt kan benyttes til stabilisering under transport på ambulancebåren. Øget stabilitet til hoved og nakke giver rigtig god mening i mange transportsituationer. Det kan bl.a. være i forbindelse med traumer, slagtilfælde, bevidsthedstab og intuberede patienter. Form puden som ønsket og sug luften ud af MRP'en med en vakuumpumpe. Pumpen skal købes separat (GEAS160).

- Høj komfort
- Nemt at anvende
- Enkel at rengøre
- Individuel tilpasning

Varenummer	GE1500000114
Højde	8 cm
Bredde	34 cm
Længde	47 cm
Vægt	700 g
Certificering	CE

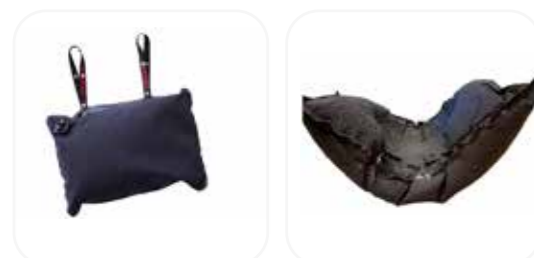

Pude til ambulancebåre, grå

Vores nyudviklede pude til ambulancebåre er meget behagelig, da den er fyldt med en blanding af skum, pudefibre og granulat. Pudens kan fastgøres til båren med to stropper, den er enkel at rengøre efter brug, og så kan den nemt medbringes.

Der er tale om en almindelig pude, og IKKE et vakuumprodukt.

Puden er designet til at give øget patientkomfort, og så er den hygiejnisk. Denne pude medfølger som standard på Alfa Legend båren.

Varenummer	AL131319
Højde	10 cm
Bredde	48 cm
Længde	36 cm
Vægt	0,7 kg




Ferno Scoop® EXL gul 227 kg

SCOOP® EXL er uden tvivl vores mest populære produkt til stabilisering, men også til situationer, hvor du skal scoope patienter op ved forflytning, hvilket er endnu vigtigere i dag, når patienten skal flyttes over på en bære. Den unikke TSL lås, designet og de ergonomiske håndtag gør Scoop® EXL uovertruffen. Scoop® EXL kan benyttes i røntgen, CT samt i MR undersøgelsesrum. Scoopbåren kan anvendes med tilbehør som X-spider og hovedstøtte, der kan bestilles separat.

Scoopbåren kan udvides med Extender kit TSL, og bevare samme vægtpåvirkning. Extender kit TSL har varenummer F0832274. Vores scoop anvendes ofte ved hjertestop til hurtig patientbehandling, og i kombination med Lucas (brystkompressionssystem).

Varenummer	F065EXL
Højde	8 cm
Bredde	43 cm
Længde	165-201 cm
Vægt	8 kg
Maks kapacitet	227 kg
Certificering	CE, EN1865

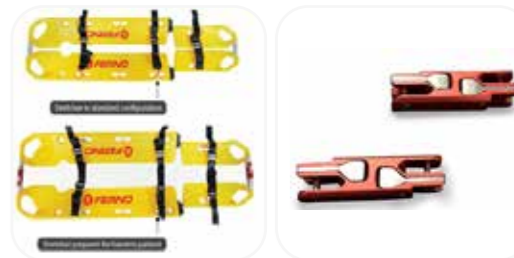

Vakuummadrass EasyFix Plus II 250 kg

EasyFix PLUS II vakuummadrass har en særlig konstruktion, der giver øget støtte til hoved, nakke og ryg uden brug af nakkekrave på patienten. Det unikke design letter også håndteringen af luftvejene hos en patient med begrænset mobilitet. Den øverste del af EasyFix PLUS har en forstærket bundplade, som dækker rygsøjlen. En unik omslagsfunktion i kombination med patientseler giver bedre støtte end traditionelle systemer. Udviklingen af dette system er inspireret af funktionerne på X-spider selen, hvor det har vist sig, at krydset fiksering giver klare fordele.

Vakuummadrassen er i dag et oplagt ergonomisk hjælpemiddel til forflytning af patienter. Sammen med Step by Step selesættet kan patienter, der vejer op til 250 kg, nemt flyttes ned ad trapper og på jævnt underlag ud til ambulancen.

Varenummer	GE23271511001
Højde	4,5 cm
Bredde	130/72 cm
Længde	208 cm
Vægt	8,7/10,5 kg
Maks kapacitet	250 kg
Certificering	CE, EN1865



Heavy duty



Evakueringsmadras Heavy duty 380 kg

Ferno's evakueringsmadras Heavy Duty er designet til at støtte i håndteringen og forflytningen af tunge patienter på en sikker og ergonomisk måde. For hurtigt at kunne bruge madrassen, når det er nødvendigt, er den konstrueret som en komplet løsning, hvor trækstroppe og bæltter er fastgjort til madrassen, så man bare kan tage den med og bruge den. Den specialbehandlede underside giver bedre glidefunktion og muliggør forflytning ved, at patienten kan trækkes henover jordoverflader og ned ad trapper uden at skulle løfte.

Madrassen har seks håndtag på hver side, så flere personer trygt kan hjælpe og lave et kontrolleret løft.

Varenummer	GE24271050000
Højde	45,5-99 cm
Bredde	7 cm
Længde	195,5 cm
Vægt	22 kg
Maks kapacitet	380 kg
Certificering	CE



Evakueringslagen Heavy Duty 380 kg

Evakueringslagenet Heavy Duty er et solidt hjælpemiddel designet til at blive brugt ved forflytning af de tungere patienter.

Det fuldsvejsede materiale, og de 20 håndtag placeret i kanten af lagenet giver fleksibilitet, når patienter skal forflyttes i forskellige miljøer. Det muliggør bedre ergonomiske arbejdsmetoder for brugerne.

Bagsiden har en glidende overflade, der reducerer friktionen, når en patient skal trækkes henover et gulv.

Varenummer	GE23005000005
Højde	1 cm
Bredde	143 cm
Længde	205 cm
Vægt	4,3 kg
Maks kapacitet	380 kg
Certificering	CE



Redningsbåre Titan SS 32 Wide 1136 kg/400 kg

Titan 32 Wide er på verdensplan vores bedst sælgende produkt til håndtering af bariatriske patienter. Redningsbåren har de samme hovedfunktioner som de øvrige båre i Titanium serien, men er fremstillet med ekstra bredde for at kunne håndtere større patienter. Båren er 32 tommer/81 cm bred og giver ekstra plads til de særlige tilfælde, hvor patientens størrelse dikterer en anden håndtering.

Båren kan benyttes med vores nye hjulsæt, hvilket giver en uovertruffen kombination til off road opgaver og redningsaktioner i vanskelige miljøer. Bæreevnen med monterede hjul er 400 kg.

Hjul skal bestilles separat og har varenummer F71W32.

Varenummer	TR110102A
Højde	18 cm
Bredde	81 cm
Længde	211 cm
Vægt	19 kg
Maks kapacitet	1136 kg (400 kg)
Certificering	CE




Ferno Surface Extender Split-Kit Scoop® EXL

Ferno Surface Extender Split-Kit Scoop® EXL gør det muligt at fastgøre en Scoop® EXL til en Ferno POWERX, iNX eller Mondial ambulancebåre.

Extender kittet giver en bredere patientoverflade, hvilket gør transporten af en lidt større patient mere behagelig. Med et par enkle trin kan en ambulancebåre konverteres til at kunne håndtere heavy duty/ bariatriske patienter. Det betyder, at en standardbåre kan gøres mere fleksibel med en øget kapacitet.

Kittet er det perfekte match til vores Ferno Transfer Heavy Duty madras (GE24271050000).

Varenummer	FGB009008250
Højde	5 cm (taske)
Bredde	24 cm (taske)
Længde	63 cm (taske)
Vægt	6,8 kg
Certificering	CE

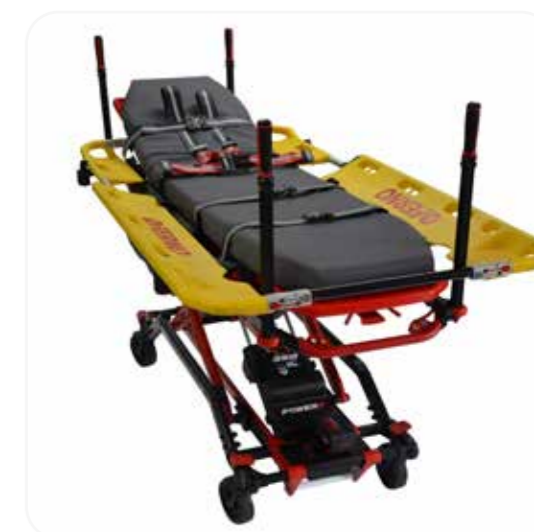



Vi har siden 1992 arbejdet tæt sammen med vores kunder både som rådgiver og partner i forbindelse med udvikling af nye produkter.

Vores udstyr benyttes dagligt af mennesker, der stiller høje krav til sikkerhed, kvalitet og funktion. Vores primære kunder er ambulancetjenester, redningsberedskaber, politiet, civilforsvaret og militæret. Vi ekspanderer inden for industri, offentlige miljøer, sundhedssektoren og det private marked.

Ferno Norden er ISO-certificeret i miljø 14001:2015 og kvalitet 9001:2015.



Vores bæredygtighedsarbejde: *Sammen gør vi en forskel!*

Vores bæredygtighedsarbejde følger og er baseret på FN's Agenda 2030, som består af 17 globale mål for bæredygtig udvikling, der sigter mod at udrydde fattigdom, stoppe klimaforandringerne og skabe fredelige og sikre samfund.



VERDENSMÅL for bæredygtig udvikling



+45 43 62 43 16
fas@fernonorden.com
www.fernonorden.dk



+47 33 03 45 00
fna@fernonorden.com
www.fernonorden.no



+46 520 420 200
fab@fernonorden.com
www.fernonorden.se



+358 (0) 29 1700 454
foy@fernonorden.com
www.fernonorden.fi