




Sjøbår

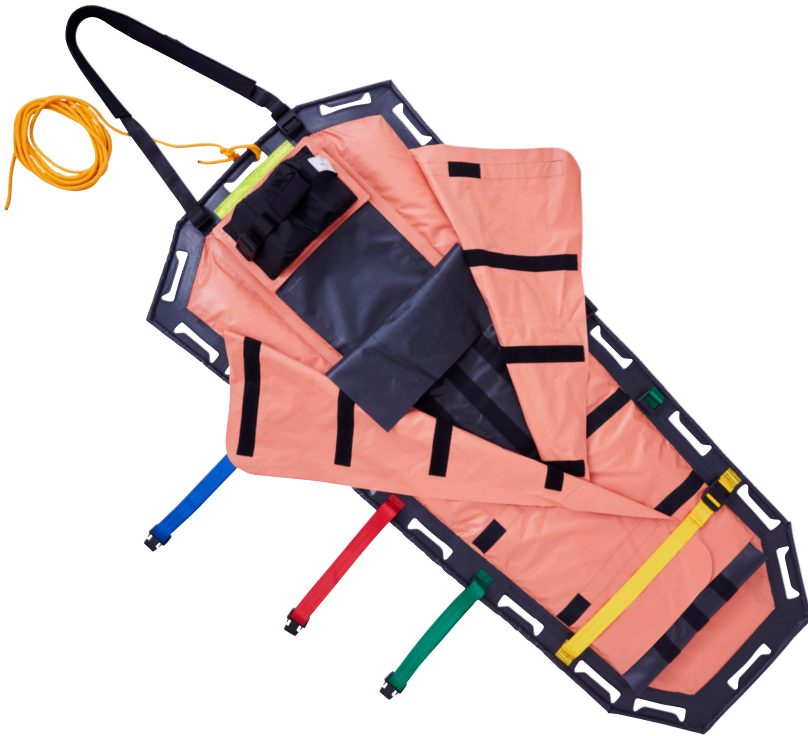

Längd	223 cm
Bredd	103 cm
Höjd	6,5 cm
Vikt	10,5 kg
Färg	Orange/Svart
Lastkapacitet	max 200 kg Flythjälp 140 kg
Certifiering	CE
Artikelnummer	GE22201811410

Sjøbåren är en väl beprövad högkvalitativ räddningsutrustning för evakuering och förflyttning i marin miljö. Sjøbåren är andra generationens marina räddningsmadrass som nu är ett uppdaterat och förbättrat räddningsverktyg.

Dess ursprungliga modell har använts i svenska flottan i över 30 år.

Sjøbåren är en kombinerad produkt som möjliggör evakuering i trånga miljöer i marina fartyg samtidigt som det skyddar personen som förflyttas.

Sjøbåren är utrustad med sju handtag på båda långsidorna och tre handtag vid huvud och fotända. Med många handtag kan man enkelt få ett bra grepp och hjälpas åt med förflyttningen.

- Den är också utrustad med fyra färgkodade patientbälten med Fix Lock-låsspännen.
- På insidan är den utrustad med en täckdel för patienten från fotändan som kommer upp över patienten samt sidmonterade skydd, alla med kardborreknäppning.
- Med förbättrad flytkapacitet kan man enklare hantera en person som eventuellt hamnar i vattnet vid evakuering mellan fartyg. Maximal kapacitet som flythjälp 140 kg.
- Baksidan är förstärkt för mindre slitage och längre hållbarhet.

